

rollz®

brengt u verder



Ergonomische en stijlvol ontworpen rollators

Met volle teugen van het leven genieten, dat is waar het bij Rollz om draait. Of het nu voor een wandeling in het park, een museumbezoek, een uitstapje of een middagje winkelen is. Onze ergonomisch en stijlvol ontworpen rollators brengen u verder en ondersteunen tegelijkertijd een actief en onafhankelijk leven.




“Nu durf ik langer te lopen met de rollator, omdat ik weet dat ik onderweg uit kan rusten in de rolstoel als ik moe word.”



Geniet van avontuur met Rollz Motion²

De rollator en rolstoel in één

De Rollz Motion² is perfect voor mensen die door willen gaan met hun reis, maar zich zorgen maken hoe ver ze kunnen komen. Dit 2-in-1 loophulpmiddel biedt u de mogelijkheid om comfortabel te lopen en ook te kunnen profiteren van de mogelijkheid om de rollator in een rolstoel te transformeren, wanneer dit nodig is.

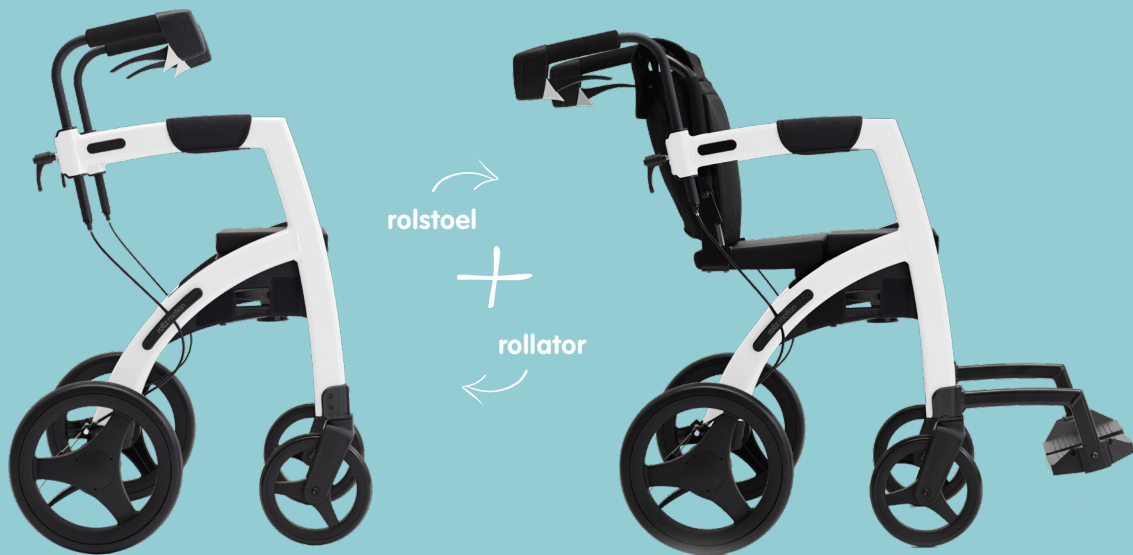

Zie de Rollz Motion in actie:



Gemakkelijk te transformeren

In een handomdraai is de Rollz Motion² rollator te transformeren in een rolstoel en weer terug. Dit geeft u het vertrouwen om verder te wandelen en onderweg te kunnen rusten, terwijl u geniet van een uitstapje met vrienden of familie.

De **Rollz Motion²** is verkrijgbaar in vier kleuren: Pebble white, Dark purple, Matt black en Island blue.

De **Rollz Motion² Small** is verkrijgbaar in Island blue of Matt black.



Eigenschappen Rollz Motion²

Stijlvol

Bekroonde Dutch design rollator en rolstoel in één, om stijlvol op pad te gaan.

Veilig

Innovatieve trommelremmen, geschikt voor natte en droge weersomstandigheden.

Gemak

Rust op de comfortabele zitting of transformeer de rollator in een rolstoel.

Drempelhelp

Ga gemakkelijk over drempels en op stoepen met de drempelhelp.

Stabiel

Loop stabiel en rechtop tussen de ergonomische handgrepen die in hoogte verstelbaar zijn.

Compact

De Rollz Motion² is eenvoudig in te klappen tot een compact pakket dat in vrijwel elke auto past.

Comfortabel

De grote achterwielen met zachte banden en foam handgrepen zorgen voor rijcomfort.

Wendbaar

Eenvoudig sturen en duwen dankzij de wendbare voorwielen.





rollz motion
electric

Rollator en elektrische rolstoel combo

De rollator, transportrolstoel & elektrische rolstoel in één

De Rollz Motion Electric is een rollator, transportrolstoel & elektrische rolstoel in één. Met dit veelzijdige 3-in-1 hulpmiddel blijft de gebruiker actief en onafhankelijk, ongeacht de mobiliteit.



Zie de Rollz Motion Electric
in actie:



Onafhankelijkheid op een hoger niveau

De Rollz Motion Electric combineert de eigenschappen van drie hulpmiddelen en helpt mensen met mobiliteitsbeperkingen zo onafhankelijk mogelijk te blijven. De rollator biedt stabiele ondersteuning tijdens het lopen, zodat gebruikers hun mobiliteit optimaal kunnen benutten. Wanneer het lopen moeilijk wordt, kan de gebruiker het rolstoelpakket bevestigen en veilig zittend verder bewegen. Het gemotoriseerde systeem vergroot de functionaliteit nog verder door er een elektrische rolstoel van te maken, waardoor gebruikers op elk moment zelfstandig kunnen reizen.

- Gemakkelijk te wisselen tussen de drie hulpmiddel opties
- Draait op zijn plek, ook in nauwe ruimtes
- Gemakkelijk in te klappen waardoor compact vervoer mogelijk is
- Comfortabele luchtbanden



Loop of rijd (zelfstandig)

Aanpasbaar

Duurzame en praktische oplossing voor meerdere mobiliteitswensen, van het gebruik van een rollator tot rolstoel.



Duw ondersteuning

Beschikt over een automatische duw ondersteuning, zodat het naar boven duwen en stoepen op gaan makkelijker wordt.



Joystick

Beschikt over een joystick waarmee de rolstoel zelfstandig gebruikt kan worden.



Modulair

Elke Rollz Motion kan omgebouwd worden naar de elektrische versie, waardoor gebruikers de vrijheid krijgen om zelfstandig te reizen.

NIEUW

Toekomst
van
mobiliteit



rolz motion
rhythm

Parkinson rollator met aanpasbare cues

De Rollz Motion Rhythm is ontwikkeld voor mensen met een verstoord looppatroon of die last hebben van freezing

Deze zeer stabiele rollator ondersteunt het inzetten van een ritmische loopbeweging met drie cues: laser, geluid, vibratie.



Zie de Rollz Motion Rhythm
in actie:



Kom in het looptempo met Rollz Motion Rhythm

Deze veelzijdige rollator kan worden gebruikt door fysiotherapeuten en andere professionals die patiënten ondersteunen bij het revalideren van neurologische of mobiliteitsbeperkende aandoeningen.

Drie cues

Deze Parkinson rollator geeft diverse prikkels om uit een freeze-moment te stappen: een laserlijn op de grond, een metronoom met twee verschillende tonen en een trilling in de handvaten. Deze drie cues zijn naar wens te combineren.



Ritme starten

De laser, vibratie en tonen geven het gewenste loopritme aan. Cue-voorkeur en tempo stelt u in via de module aan de rollator. Met een druk op de knop in het handvat start het ritmische patroon.




Makkelijk instellen en activeren

CUES | zie
voel
hoor

Ga sneller of langzamer

Het tempo van de signalen kan licht zijn versneld om de gebruiker te stimuleren om sneller te lopen. Of het tempo kan lager worden gezet, voor soepelere bewegingen.

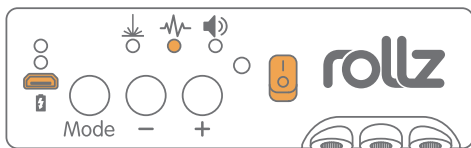

Twee tonen

Variatie in toonhoogte van de metronoom voorkomt gewenning, zo blijft de gebruiker gefocust. Deze tonen kunnen ook worden afgespeeld via de smartphone.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All		
	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	Laser
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vibratie
	□	■	■	■	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	Hoge toon
	■	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	Lage toon

Smartphone app

De vibratie, toonhoogte en geluidsintensiteit kunnen worden aangepast in de bijbehorende app op de smartphone. Via de app kan de patroonlengte van de cues worden ingesteld op: 8x, 16x, 32x of non-stop.



RollzRhythm



Best New
Product
2022




rolz motion
performance

Comfortabel en veilig rijden over ruw terrein

All terrain rollator en rolstoel in één

Dankzij de vier luchtbanden zorgt de Rollz Motion Performance voor een comfortabele rit, zelfs over hobbelig terrein. De extra dikke vulling van de armleuningen en de ergonomisch gevormde handgrepen verhogen het comfort. Bovendien zijn de voetsteunen in hoogte verstelbaar.

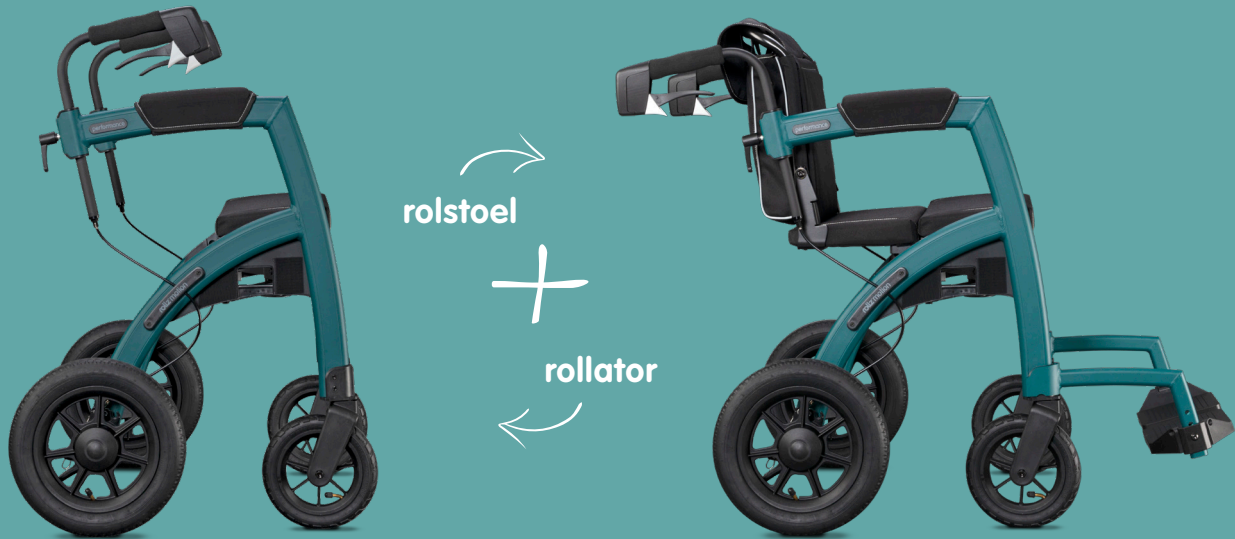

Eigenschappen Rollz Motion Performance

Stijlvolle 2 in 1

Nederlands design om stijlvol op pad te gaan, dat binnen enkele seconden van rollator in rolstoel transformeert.

Ergonomische grepen

Ergonomisch gevormde zachte handgrepen voor optimale grip.

Opvallende kleur

Moderne matte coating in jungle green.

Zichtbaar

Beter zichtbaar in het donker dankzij reflecterende onderdelen.



Zachte vulling

Armsteunen met extra dikke schuimvulling voor extra comfort.

Stevige zitting

Wigvormig kussen voor een betere zithouding.

Luchtbanden

Stevige luchtbanden voor comfortabeler ritten op hobbelig wegdek.

Stabiel

Loop rechtop en stabiel, veilig ondersteund door een robuust ontwerp.

Specificaties

	Rollz Motion ² Normaal	Rollz Motion2 Klein	Rollz Motion Performance	Rollz Motion Rhythm	Rollz Motion Electric
Rollator gewicht	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg	11,6 kg	22,6 kg (exclusief rolstoel)
Rolstoelpakket gewicht	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Maximale belasting	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	100 kg
Lengte gebruiker	1,60 - 1,90 m	1,50 - 1,85 m	1,60 - 1,90 m	1,60 - 1,90 m	1,60 - 1,90 m
Zithoogte	55 cm	50 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Hoogte handgrepen	87-98 cm	82-94 cm	86-98 cm	87-98 cm	88-99 cm
Afmetingen kussen rollator	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Afmetingen kussen rolstoel	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Breedte	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	74 cm
Lengte	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	71 cm
Breedte ingeklapt	31 cm	31 cm	29 cm	31 cm	44 cm
Voorwiel diameter	8 inch	8 inch	8 x 1¼ inch	8 inch	8 inch
Achterwiel diameter	12 inch	12 inch	12½ x 2¼ inch	12 inch	12½ x 2¼ inch

GARANTIE: 5 jaar op het frame en 2 jaar op overige onderdelen. Slijtagegevoelige onderdelen niet inbegrepen.

“Ik zocht een rollator die er niet als rollator uitziet. Winkelen is weer plezierig, want deze rollator is zo gemakkelijk te manoeuvreren!”



rolz flex

Op stap met Rollz Flex²

Design rollator met grote tas

Op het eerste gezicht is niet te zien dat het een rollator is, dat was precies de bedoeling van de ontwerpers, om een aangenaam ontwerp te creëren om mee naar buiten te gaan. Deze rollator manoeuvreert gemakkelijk en je kunt stabiel en comfortabel lopen, terwijl de tas je boodschappen draagt.



Zie de Rollz Flex in actie:



Wendbaar

Je kunt overal gemakkelijk manoeuvreren, zelfs tussen obstakels door. De voor- en achterwielen staan dicht bij elkaar, waardoor je rollator dicht om je heen draait. Hiermee kunt u soepel draaien in een smalle ruimte.

Wanneer je een bocht maakt, zitten de wielen niet in de weg. Je stapt eenvoudig opzij en haalt iets uit een kast of rek. De Rollz Flex² functioneert hetzelfde wanneer de tas tot zijn capaciteit is geladen.

Met behulp van de drempelhulp ga je gemakkelijk de stoepranden op.



Eigenschappen Rollz Flex²

Stijlvol

Lichtgewicht rollator met de uitstraling van een design shopper.

Flexibel

Geschikt voor lange of kortere mensen, dankzij de eenvoudig aanpasbare duwbeugel.

Praktisch

De grote, waterafstotende tas kan tot wel 20 kg dragen. Inclusief uitneembare binnentas.

Comfortabel

Rollz Flex² zorgt voor een comfortabele rit met minder vibraties dankzij de zachtere schuimgevulde banden.

Wendbaar

Gemakkelijk te duwen en sturen dankzij de kleine draaicirkel.

Gemak

Even uitrusten op de kunstlederen zitting met de duwbeugel als rugleuning.

Drempelhelp

Ga gemakkelijk over drempels en op stoepen met de drempelhelp, ook met volle tas.

Licht en compact

De Rollz Flex² weegt maar 7,7 kg en is gemakkelijk en compact in te klappen.





prijs
favoriet

altijd goed,
altijd goedkoop



rolz flex

Specificaties

	Rollz Flex² Normaal	Rollz Flex² Klein
Rollator gewicht	7,7 kg	6,8 kg
Lengte gebruiker	1,55-1,95m	1,40-1,60m
Zithoogte	62 cm	52,5 cm
Zitbreedte	44 cm	44 cm
Maximale belasting	125 kg	125 kg
Breedte	62,3 cm	62,3 cm
Lengte	60 cm	60 cm
Diepte	33 cm	33 cm
Hoogte	80-100 cm	69-81 cm
Capaciteit tas	25 liter/20 kg	14 liter/20 kg
Wiel diameter	8 inch	8 inch

De **Rollz Flex²** is verkrijgbaar in vier framekleuren: Matt black, Pebble white, Dark purple en Jungle green. De tas is gemaakt van een duurzaam en waterafstotend materiaal en is beschikbaar in grijs.

GARANTIE: 5 jaar op het frame en 2 jaar op de overige onderdelen. Slijtagegevoelige onderdelen niet inbegrepen.





Rollz Motion reishoes

Door het unieke design zijn de Rollz Motion en het rolstoelpakket geïntegreerd tot één compact pakket. Gebruik van de reishoes zal beschadigingen voorkomen.



Rollz Motion shopper

Deze stijlvolle en functionele tas kan op het frame van de Rollz Motion worden geklikt. U kunt uw aankopen direct in de shopper doen en meenemen, u hoeft dus geen boodschappentas mee te dragen.



Rollz Motion bekerhouder

De Rollz bekerhouder is zeer eenvoudig in gebruik. Dankzij het schuifstelsel kan de houder snel in de gewenste positie worden geplaatst, waardoor de gebruiker een flesje water kan meenemen.



Rollz Motion 3-in-1 rolstoelpakkethouder

Met deze houders kunt u ook uw rolstoelpakket boven de zitting hangen. Hierdoor heeft u meer loopruimte en bewegingsvrijheid. Een wandelstok en boodschappentashouder zijn geïntegreerd.



Rollz Motion en Rollz Flex paraplu's

Deze paraplu beschermt je tegen regen en zonnescijjn. Het wordt aan het frame bevestigd, zodat u met beide handen de de rollator kunt gebruiken en goed ondersteund blijft.

Rollz Motion rugsteun

Er alleen op uit en het rolstoelpakket thuis gelaten? Met deze rugsteun kunt u onderweg toch even uitrusten terwijl u leunt tegen de zachte band.



Rollz Motion gordel

De gordel houdt u vast in de rolstoel voor extra veiligheid. Hij kan eenvoudig op het rolstoelpakket worden geplaatst en op de gewenste lengte worden afgesteld.



Rollz Flex stokhouder

De stokhouder wordt aan de duwbeugel bevestigd en blijft daar. Het bijbehorende onderdeel is ontworpen om op bijna elke wandelstok te passen.



Rollz Flex tashaken

Als u gaat winkelen, kunt u met deze twee tashaken extra tasjes meenemen.



Rollz Motion en Rollz Flex dienblad

Met dit bamboe dienblad neemt u eenvoudig een kopje koffie of een boek binnenshuis overal mee naartoe.



Rollz International BV
Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft

020 362 2010
www.rollz.nl

rollz[®]



[rollzint](#)



[RollzInternational](#)



[rollzint](#)



[RollzInternational](#)