

Softform[®] Premier Active 2

met Active 2 RX innovatieve digitale pomp



Yes, you can.[®]

Een dynamisch steunvlak voor betere drukverlichting

Om zorgprofessionals een dynamische en therapeutische matras te bieden - met verschillende niveaus van drukverlaging - hebben we de Active 2 RX digitale pomp gecreëerd en zo onze Softform Premier Active 2 schuim matras verbeterd.

Deze nieuwe pomp stelt zorgprofessionals in staat patiënten optimaal te ondersteunen door middel van actief wisselende luchtcellen.

Door het gebruik van de innovatieve digitale pomp in combinatie met de klinisch bewezen Softform Premier matras helpen deze wisselende luchtcellen bij het voorkomen van drukplekken.

Statisch oppervlak voor "zeer hoog risico" op decubitus

Een speciaal gesneden, kwalitatief hoogwaardig schuim maakt effectief gebruik van de contouren van het lichaam als het gaat om micro-klimaat en drukverdeling. Het biedt preventie, comfort en effectiviteit aan patiënten met een zeer hoog risico op decubitus. Het statische oppervlak kan eenvoudig opgeschaald worden door de innovatieve digitale pomp te activeren, in een verdergaande behandeling van drukplekken.

Een volledig en vooruitstrevende oplossing voor elke patiënt

- ▶ De Softform Premier Active 2 matras combineert de drukverlagende kwaliteiten van de speciaal gesneden schuim met de flexibele luchtcompartimenten daaronder. Deze kunnen, indien noodzakelijk, afzonderlijk gevuld worden voor een dynamische behandeling.
- ▶ Deze opbouw zorgt ervoor dat de patiënt altijd ondersteund wordt door het kwalitatief hoogwaardig schuim*, of de innovatieve digitale pomp (die de luchtcompartimenten activeert) nu aan of uit staat. Het comfortabele schuim biedt ten allen tijde effectieve drukverlaging en een hoog comfort.
- ▶ De Softform Premier Active 2 is verkrijgbaar in verschillende bredere maten om een veilige, waardige ondersteuning te bieden aan patiënten die een bredere matras nodig hebben.



* Meer info op <https://invacarerest.com/europe-en/knowledge/clinical-evidence/>

** (NICE Clinical Guideline 179, September 2014)

5

HOOFDKENMERKEN IN EEN OOGOPSLAG

Van de modulaire opbouw tot de Plug'n'Play innovatieve digitale pomp...

1

Kwalitatief hoogwaardig Statisch schuim oppervlak

Indien stroomstoring zich voordoet, ligt de patiënt nog steeds op een drukverlagende matras, geschikt voor mensen met een "zeer hoog risico" op decubitus. Hierbij wordt het risico op eventuele letsels geminimaliseerd.



2

Plug'n'Play Innovatieve digitale pomp

De intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om de pomp te installeren en te gebruiken.






3

Een modulair en vooruitstrevend ontwerp

Alle componenten zijn eenvoudig te vervangen, wat bijdraagt aan lagere kosten van eigendom.

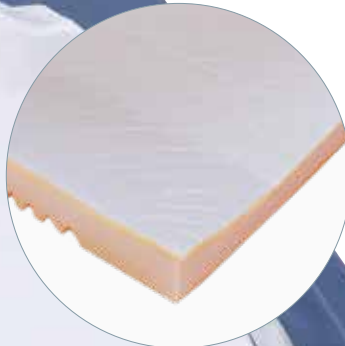

4

Verminderde schuifkrachten dankzij glijmechanisme

Dit innovatief glijmechanisme vermindert de schuifkrachten aanzienlijk wanneer de matras gebruikt wordt op een elektrisch verstelbaar bed (EPUAP, 2014).

5

Automatisch verstelbaar

Er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan met betrekking tot druk. De Active 2RX pomp levert optimale druk.

Hybride matrassen

Er zijn grofweg 2 types hybride matrassen

1

Foam met een lage dichtheid in een laag wisselende luchtcellen.

Hybride ondersteuning in "statische" stand



› Kwalitatief hoogwaardige foamlaag in een lege luchtcel



2

Kwalitatief hoogwaardige foamlaag bovenop een laag wisselende luchtcellen.

Hybride ondersteuning in "dynamische" stand



› Lege luchtcel onder een kwalitatief hoogwaardige foamlaag



› Het eerste type hybride matras is vergelijkbaar met een niet-elektrisch hybride matras, maar biedt de mogelijkheid een innovatieve digitale pomp toe te voegen.

Deze innovatieve digitale pomp heeft twee belangrijke functies:

1. Om te voorkomen dat er lucht uit het matras loopt
2. Om een vorm van wisselende drukondersteuning te bieden als opgeschaalde therapie

De wisselende ondersteuning die geboden wordt heeft een lage amplitude. Dit komt doordat de luchtcellen met een foamkern zijn gevuld. Hierdoor is het laten leeglopen, een essentieel onderdeel van wisselende ondersteuning, minder optimaal in vergelijking met traditionele ondersteuningsproducten.

Technische gegevens ▼


Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Breedte ▼



Lengte ▼

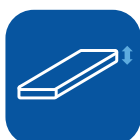

Hoogte ▼



Productgewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigingstemperatuur hoes ▼

Softform Active 2 RX Matras

880 mm (in stappen van 10mm)

1950mm (in stappen van 10mm)

152 mm

14 kg

247.6 kg

95° C



Diepte ▼



Breedte ▼



Hoogte ▼



Gewicht ▼

Pomp

105 mm

275 mm

155 mm

1.75 kg

Kleur ▼



Baltisch Blauw

Kleuren kunnen iets afwijken van het hierboven weergegeven.

Regelgeving ▼

Matras gefabriceerd volgens:

Europese Norm: BS EN 597-1 Cig
Europese Norm: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Pomp:

Geluidsniveau: ≤ 24 dB
Cyclustijd: 10 minuten (1 in 2 cyclus)

Brandweervoorschrift:

BS7177:2008

*Testrapport op aanvraag verkrijgbaar.

Overige info ▼

- ▶ Kwalitatief hoogwaardig gesneden schuim oppervlak
- ▶ Actieve ondersteuning wanneer nodig
- ▶ Klinisch bewezen voor alle categorieën decubitus*
- ▶ Geschikt voor patiënten met zeer hoog / hoog risico
- ▶ Crib 5 of 7 brandvertragende hoesopties
- ▶ Maximum gebruikersgewicht 247,6 kg
- ▶ In verschillende maten verkrijgbaar

Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van decubitus. Deze matras draagt op positieve wijze bij aan een zorgplan ter voorkoming van decubitus. Scholing, klinische beoordeling en actie-gebaseerde planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren als het gaat om decubituspreventie. Een reeks beoordelingsschalen kan gebruikt worden als formele methode van risicobepaling en zou ingezet moeten worden tezamen met informele beoordeling (die van de zorgverlener).

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Email: marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®