



vergroting *Optelec ClearView C*



Specificaties

- **Uniek en modern design** dat in elk interieur past.
- De arm in **C-vorm** biedt **maximale werkruimte**.
- **Ruime leestafel** om gemakkelijk grote boeken te lezen.
- **Elegant Design** samen te stellen volgens uw wensen:
 - **Bediening** met **basis** of **geavanceerde** opties.
 - **Heldere breedbeeldschermen** in twee maten: **21.5"** of **24"**.
 - Speciale **TwinView monitor** voor computergebruikers.
- **Optionele spraakmodule** met aanraakscherm om de tekst te laten voorlezen.
- **High Definition camera** voor een scherp en helder beeld.
- Ruimtebesparende **Compacte** of bredere **Comfort** opstelling.

Optelec N.V.

Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge
Tel: 050 35 75 55

info@optelec.be
www.optelec.be

Optelec



magnification



speech



braille


Optelec ClearView C



vergroting *ClearView C* *comfortabel lezen*

Optelec
Life is worth enjoying

**Eenvoudige en effectieve oplossingen
voor blinden en slechtzienden**

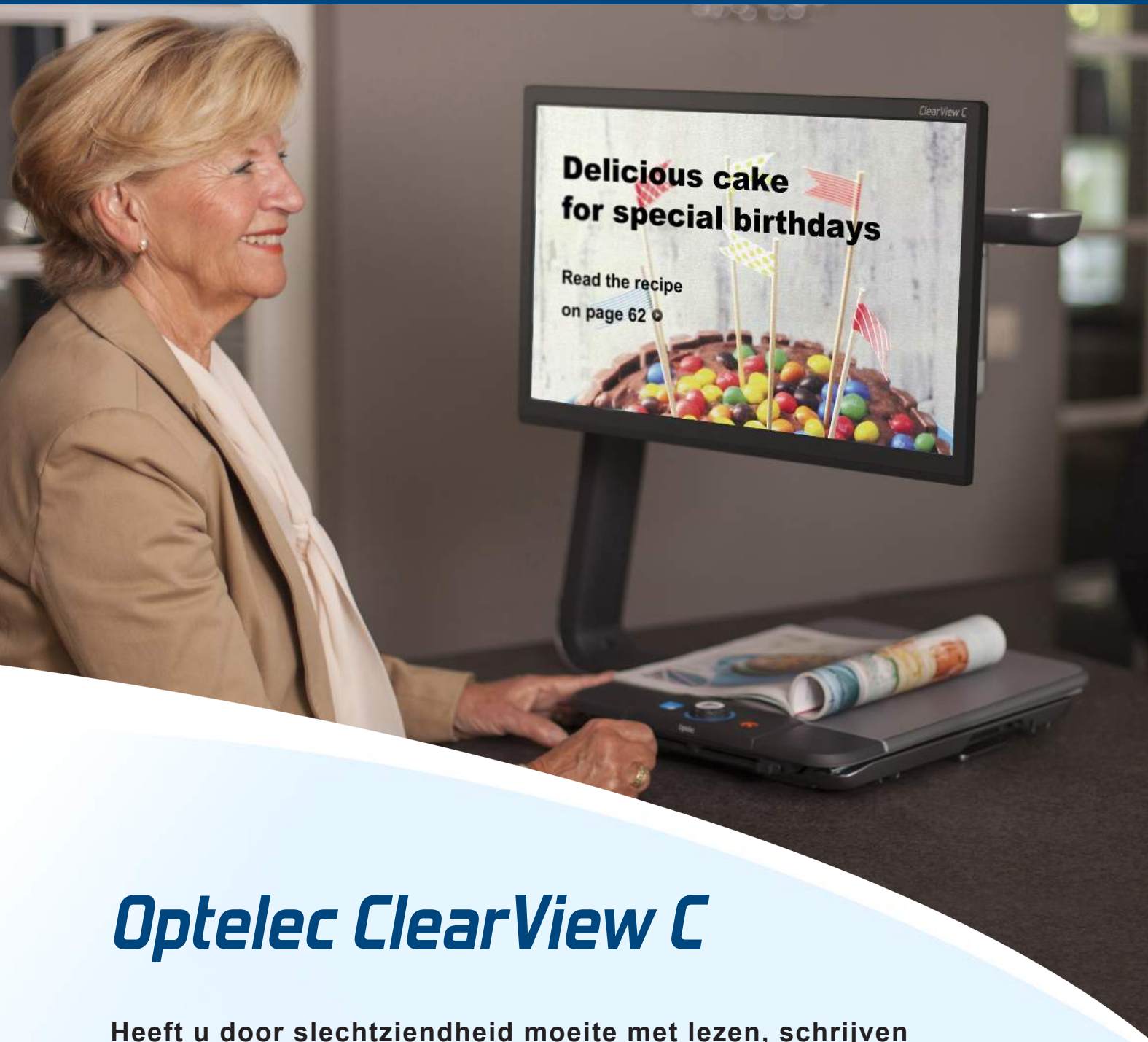

Optelec ClearView C

Heeft u door slechtheid moeite met lezen, schrijven of foto's bekijken?

De Optelec ClearView C beeldschermloep is de ideale oplossing. Eenvoud in gebruik staat centraal. Het nieuwe en unieke design in de vorm van de letter C zorgt voor extra werkruimte. U kunt hierdoor gemakkelijk uw krant lezen, een hobby uitoefenen of een brief schrijven zonder in uw bewegingen te worden beperkt.

Kies voor comfort en een uniek ontwerp !

Hoe werkt het?

De ClearView C is heel eenvoudig in gebruik. Plaats de tekst of foto op de beweegbare leestafel. Deze wordt dan door de camera vergroot weergegeven op het beeldscherm.

Contrast en vergroting

Stel de vergroting in van 1,5 tot 100 maal. De contrast kleurinstellingen zoals bijvoorbeeld witte letters op een zwarte achtergrond maken het lezen prettiger.

Nieuw design: meer werkruimte

De monitorsteun zit aan de zijkant. Hierdoor heeft u volledige bewegingsvrijheid aan alle kanten van de verschuifbare leestafel. De camera is zo geplaatst dat u veel ruimte in de hoogte hebt.

Meer leescomfort

Bij een traditionele beeldschermloep trekt u de leestafel naar u toe om de bovenkant van de tekst te bekijken. Omdat de ClearView C camera verder naar achteren is geplaatst, is de bovenkant van de tekst meteen in beeld. Hierdoor hoeft u minder te schuiven met de leestafel wat zorgt voor een rustige leeservaring.

Uitvoeringen

De ClearView C is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

U kunt kiezen uit 2 verschillende schermformaten: 21,5" of 24".

Er is ook een voorleesfunctie om de tekst naast de vergroting te kunnen beluisteren. Voor computergebruikers is er een TwinView monitor.

