

AIRWAVE ROLLY RM 12/15- OPROLBAAR MATRASVERVANGEND HYBRIDE SYSTEEM



- Behandeling van doorligwonden tot graad 4
- De patiënt ligt op de cellen
- Onder de cellen bevindt zich een mousse ondermatras van 5 cm
- Verwisselbare cellen (19 stuks met een \varnothing van 12 of 15 cm)
- Drukvermindering en verplaatsing van de drukpunten bevorderen de capillaire bloeddorstroming
- Drukopheffende hielsectie: mogelijkheid om de cellen te regelen
- De elektrische voeding is in de matras geïntegreerd.
- Excel hoes
- Geschikt voor patiënten van 30 tot 180 kg (Rolly RM 12 is geschikt tot 160 kg)
- Afmetingen standaard 195 x 85 x 17/20 cm
- CPR functie
- **Bij een stroom onderbreking kunnen de cellen tot 8 uur lang gevuld met lucht blijven!**

BESCHIKBARE VARIANTEN

Model A: Airwave Rolly RM 12

met 19 cellen met een \varnothing van 12 cm en mousse onderlaag van 5 cm



Model B: Airwave Rolly RM 15

met 19 cellen met een \varnothing van 15 cm en mousse onderlaag van 5 cm



met Quiétude Sprint pomp



met Quietude ARC pomp



met S@R pomp





AIRWAVE SYSTEEM: HYBRIDE MATRASVERVANGEND SYSTEEM



- 3 modellen beschikbaar: 8, 16 of 19 cellen
- Behandeling van doorligwonden tot graad 4
- Veilige werkbelasting van 25 tot 200 kg
- De patiënt ligt op de cellen vervaardigd uit polyurethaan met een \varnothing van 12 cm
- Drukvermindering en verplaatsing van de drukpunten bevorderen de capillaire bloeddoorstroming
- Een statisch schuimrubberen hoofdkussen biedt extra patiëntencomfort (bij model 8 en 16 cellen)
- Verwijderbare, ondoordringbare EXELL hoes
- Verwisselbare cellen
- Mousse kader van de matras verstevigt het geheel
- Vergemakelijkt het opmaken van het bed en het uitstappen uit bed
- Standaard afmetingen: 195x85x16cm
- **Bij een stroom onderbreking kunnen de cellen tot 8 uur lang gevuld met lucht blijven!**

**Uitbreidbaar met een alternerend
zitkussen voor een 24 uren preventie.**





BESCHIKBARE MODELLEN

Model A: Airwave systeem


met 6 cellen ter hoogte van het zitvlak en 2 cellen ter hoogte van de hielen



met Quiétude Sprint pomp

Model B: Airwave systeem

met 16 cellen en statisch schuimrubberen hoofdkussen

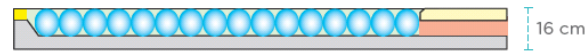

met Quietude ARC pomp

Model C : Airwave systeem

met 19 cellen



met S@R pomp


SOFTWARE SYSTEEM: HYBRIDE MATRASVERVANGEND SYSTEEM



- Behandeling van doorligwonden tot graad 4
- Veilige werkbelasting van 25 tot 180 kg
- De patiënt ligt op de 17 cellen vervaardigd uit polyurethaan met een \varnothing van 12 cm
- Drukvermindering en verplaatsing van de drukpunten bevorderen de capillaire bloeddorstroming
- Drukopheffende hielsectie: mogelijkheid om de cellen te regelen
- Bedekt met een laag visco-elastisch schuimrubber
- Verwijderbare, ondoordringbare excel hoes
- Verwisselbare cellen
- Mousse kader van de matras verstevigt het geheel
- Vergemakkelijkt het opmaken van het bed
- Standaard afmetingen: 195x85x16cm

BESCHIKBARE VARIANTEN

Model A: Software systeem met 17 cellen

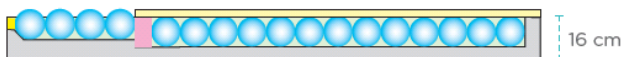

met Quiétude Sprint pomp



met Quietude ARC pomp



met S@R pomp





AIRWAVE TOPPER: OPLEGMATRAS



- Behandeling van doorligwonden tot graad 4
- Veilige werkbelasting van 30 tot 160 kg
- De patiënt ligt op 19 cellen van Ø van 12 cm
- Drukvermindering en verplaatsing van de drukpunten bevorderen de capillaire bloeddorstroming
- Drukopheffende hielsectie: mogelijkheid om de cellen te regelen
- Verwijderbare, ondoordringbare hoes met ritsluiting wasbaar op 95°C
- Verwisselbare cellen
- Stroomkabel verwerkt in de matras
- Elastische bevestigingsriemen
- Transportzak
- Gebruiksvriendelijk en makkelijk op te bergen
- Standaard afmetingen: 195x85x12cm
- CPR functie



BESCHIKBARE VARIANTEN

Model A: Airwave Topper
met 19 cellen



met Quiétude Sprint pomp



met Quietude ARC pomp



met S@R pomp





QUIETUDE SPRINT POMP

- Pomp met handmatige elektronische regeling
- Regeling volgens het gewicht van de patiënt/resident, tussen 30 en 180 kg
- Geen interventie nodig voor verandering van houding tussen zitten/liggen
- Dynamische werking, alternatie van nursing-modus met automatische terugkeer naar alternatie-modus
- Zeer zuinig en geluidsarm
- Werkingsindicator (groene lampje brandt als het systeem functioneel is)
- Audio-visueel lagedruk- en stroomstoringsalarm
- Stil, zet zich in slaapstand als de matras op druk is, en springt terug aan als het systeem alterneert
- CPC connectoren
- Gebruik in woon- en zorgcentra en thuiszorg





QUIETUDE ARC POMP

- Pomp met "Automatic Regulation"
- Volautomatische en zelfregulerende aanpassing zonder externe tussenkomst dankzij de detectie van het gewicht evenals de hoekverstelling van het ligvlak.
- Het algoritme maakt constante zelfregulatie mogelijk door het lezen van de drukken bij elke cyclus = veranderingen in debiet-/drukinstructies
- Debiet van 7 liter: de pomp is geschikt voor patiënten/residenten tussen 25 en 160/180/200 kg, afhankelijk van het type matras
- Dynamische werking, alternation of nursing-modus met automatische terugkeer naar alternationmodus
- Zeer zuinig, geluidsarm (<22dB) en zonder vibraties
- Werkingsindicator (groene lampje brandt als het systeem functioneel is) voor een betere controle door het verzorgend personeel
- Audio-visueel lagedruk- en stroomstoringsalarm (hoorbaar vanaf 50 dB)
- 12/24 u transportfunctie, snelle leegloop van de matras in noodgeval
- Universele ondersteuning geschikt voor elk type bed
- Plug-in/out Stroomkabel 220 v, 50 hertz en CPC-koppelingen op de luchtleidingen
- Doorgang van de kabel door de matras en NIET over de vloer om elk risico op schade en defecten te voorkomen)
- Opblaastijd van onbelaste matras < 20 minuten
- Horizontale bevestiging aan het voetpaneel van het bed dmv ophanghaken, pomp te verwijderen tijdens transport om valaccidenten te voorkomen
- Audio-visueel lagedruk- en stroomstoringsalarm
- Cyclus van 12 minuten
- Niveau 2 (membranefilter controle) corrigerend onderhoud aanbevolen, om de 2 jaar
- Inclusief Interco-connectfunctie/Wifi/Auto Check/localisatie
-
- Gebruik in woon- en zorgcentra en thuiszorg



S.@.R. POMP

- 'Setting Automat Regulation'pomp -
- Volautomatische en zelfregulerende aanpassing zonder externe tussenkomst dankzij de detectie van het gewicht en de hoekverstelling van het ligvlak
- Het algoritme maakt constante zelfregulatie mogelijk door het lezen van de drukken bij elke cyclus = veranderingen in debiet-/drukinstructies
- Debiet van meer dan 15 liter: de pomp is geschikt voor patiënten/residenten van 25 tot 220 of 250 kg naargelang het type van matras
- Dynamische werking, alternatieg of nursing-modus met automatische terugkeer naar alternatiegmodus
- Zeer zuinig in verbruik, stil (12 dB) en zonder vibraties
- Werkingsindicator (groene lampje brandt als het systeem functioneel is) voor een betere controle door het verzorgend personeel
- Audio-visueel lagedruk- en stroomstoringsalarm (hoorbaar vanaf 50 dB)
- 12/24 u transportfunctie, snelle leegloop van de matras in noodgeval
- Universele ondersteuning geschikt voor elk type bed
- Plug-in/out Stroomkabel 220 v, 50 hertz en CPC-koppelingen op de luchtleidingen
- afneembare pomp en CPC connector (de kabel loopt door de matras en NIET over de grond om elk soort schade of defecten te vermijden)
- Opblaastijd < 20 minuten
- Horizontale bevestiging, verwijderbaar tijdens transport
- Audio-visueel lagedruk- en stroomstoringsalarm
- Cyclus van 12 minuten
- Corrigerend onderhoud aanbevolen, om de 4 jaar
- Inclusief Interco-connectie/Wifi/Auto Check/localisatie
- Gebruik in ziekenhuizen



EXPERT POMP

De Expert pomp beschikt over dezelfde eigenschappen als de S.@.R. pomp,

maar heeft volgende bijkomende voordelen:

- Met een debiet van meer dan 15 liter kan de pomp een patiënt aan met een gewicht van 25 tot 350 kg, afhankelijk van het type matras (RR21)
- Nog preciezere automatische drukregeling dankzij het gebruik van rechthoekige cellen verbonden door een centrale kern
- Geschikt voor patiënten/residenten met een Nortonscore van < 8 die niet kunnen gemobiliseerd worden
- Gebruik in ziekenhuizen

