

## Technische fiche



### Informaties


Aanstelling Inklapbare douchestoel Arsis®, 442 x 450 x 500 mm, Wit ABS zetel en Verchroomd onderstel, Ø 25 mm

Referentie 047732

#### DE PLUSPUNTEN

Montage va het doucheplankje op de houder op de plaats van het Arsis® zitje.  
Met automatische steunpoot.

## Beschrijving

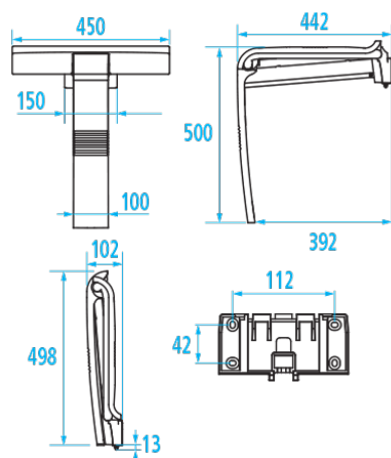

Opklapbare douchezitting met automatische verchroomd steunpoot. Onderstel uit wit of verchroomd aluminium gietijzer, ergonomische basis grote maat 450 mm uit ABS, onzichtbare bevestigingen.  
Vergrendelpositie, antidiefstal. Kan van zijn muurhouder geclijpt worden voor onderhoud en occasioneel gebruik in gemeenschappen.

Montage van het plankje op de jouder op de plaats van het zitje (Ref. 047735 ou 047736).

Genormaliseerde hoogte 500 mm.  
Verkocht met plankje met muurhouder en schroeven.  
Onzichtbare bevestigingen.  
Ze passen perfect bij de stangen van het Arsis® gamma.  
Aangepast aan hotelgebruik.

## Technische kenmerken

Diameter Ø	25 mm
Afwerking	Verchroomd
Afmetingen	442 x 450 x 500 mm
Materiaal	ABS en Aluminium
Kleur	Wit en Verchroomd
Getest in laboratorium aan	225 kg
Verpakking	Kartonnen doos
Waarborg	5 jaar
CE : toegelaten belasting	150 kg
Gencod	3563390477328
Douanecode	7615200000

## Ondehoud en installatie gids

---

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteen. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteen is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten. Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze stoel.

## Onderhoud

**BELANGRIJK:** Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

## Faciliteit van gebruik

---

### Functie


---

Rust 

### Kenmerken

---

Horizontaal 

Verticaal 

Schuin 

Corrosiewerrend 

### Soort gebruik

---

Bad 

Douche 

WC 


Wastafel 

Kleedkamer 

### Plaats van gebruik

---

Medische instellingen 

ERP/IOP 

Hotels 

Prive huizen 

Wekplaatsen 