

Veldink is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van moderne, eigentijdse kinderrolstoelen en kinderstoelen waarbij de wensen en eisen van kinderen en hun ouders en/of verzorgers altijd centraal staan. Onze nauwe samenwerking met therapeuten staat garant voor de kwaliteit en zorgt voor een optimale balans tussen design en functionaliteit, met als uitgangspunt "No Limits".

 **Veldink4kids**
no limits

Wil je ons bereiken?



Drentse Poort 15 A
Nieuw-Buinen
9521 JA

Wil je ons volgen?



www.facebook.com/veldink4kids



www.youtube.com/veldink4kids



info@veldink4kids.com



[@veldink4kids](https://twitter.com/veldink4kids)



+31 (0)599 - 62 04 12



www.veldink4kids.com



Kiddo Classic

Kiddo Classic

Bij het ontwikkelen van de Kiddo Classic stond het kind centraal. Deze 4-wiel kinderrolstoel wordt op maat gemaakt en is een combinatie van eigentijds design met functionaliteit. Less is more!

De Kiddo Classic kan geheel worden ingesteld naar de ergonomische eisen en het individuele comfort van de gebruiker. Door het open karakter en gestroomlijnde vormgeving is de Classic een zeer robuuste, licht rijdende, wendbare en stoere stoel. Optioneel zo uit te breiden dat deze zeer geschikt is voor zowel de actieve- als passieve gebruiker. De vele opties en accessoire mogelijkheden worden verderop in deze folder uitgebreid besproken.

Maatvoering

Geen kind is gelijk en geen Classic is het zelfde. Elke Kiddo Classic wordt op de eisen en wensen van de gebruiker gebouwd. Met de Classic is een ruime variatie in maatvoeringen mogelijk. De rolstoel kan vanaf de geleverde maat meegroeien met de gebruiker. Daarnaast is de rolstoel eenvoudig in te stellen en te verstellen. Zie de maattabel voor detail info.

Normering

Maximaal gebruikersgewicht is 75kg. De Kiddo Classic is getest en goedgekeurd door TÜV Rheinland voor veilig vervoer van kinderen in motorvoertuigen: ISO 7176-19.



Service

Voor aanvullende informatie en al uw vragen met betrekking tot de Kiddo Classic kunt u altijd contact met ons opnemen.



Individualiteit

Jezelf kunnen zijn, je laten zien wie jij bent en waar je voor staat, de Classic past zich aan jou aan. Door de vele framekleuren en accessoires bepaal jij zelf hoe je gezien wilt worden.

Zelfs de accessoires kan je personaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld het werkblad en de spaakbeschermers voorzien van eigen afbeeldingen.

Het samenstellen van jouw eigen rolstoel is mogelijk en nu kan je al van te voren zien hoe dit er dan uit zal gaan zien. Van te voren je eigen 3D model opvragen en deze delen met iedereen om je heen.



Algemene gegevens
















Kleuren

Het frame van de Classic kan uitgevoerd worden in onderstaande standaard kleuren. Verder is het mogelijk om de Classic te voorzien van spaakbeschermers. Voor de spaakbeschermers kan je kiezen uit een groot assortiment designs of gebruik je eigen afbeelding. Kijk op www.veldink4kids.com voor de afbeeldingen.



Technische gegevens

Voor de Kiddo Classic zijn de volgende gegevens van toepassing

	Zitbreedte 22 - 43 cm		Totale lengte Vanaf 72 cm		Totale gewicht Vanaf 17,4 kg inclusief complete zittingkussen en rugkussen
	Zitdiepte 20 - 45 cm		Totale breedte Vanaf 52 cm		Gewicht zonder aandrijfwielen Vanaf 12,4 kg inclusief complete zittingkussen en rugkussen
	Zithoogte 40 - 58 cm		Rughoek 10 graden		Achterwielmaat 22" 24" 26"
	Onderbeen lengte 16 - 45 cm		Camber 7 graden		Voorwielmaat 5" 6"
	Rughoogte 21 - 48 cm		Maximale belasting 75 kg.		CE gekeurd & Getest en goedgekeurd voor veilig vervoer ISO 7176-19

De instelbare maten van de eerste kolom zijn olopend per centimeter.



Kies je eigen spaakbeschermers!



Kiddo Classic

Achterwielen

Keuze uit 22" 24" of 26" achterwielen, naar keus luchtbanden (Schwalbe rightrun) of lekvrije banden. Wielen standaard voorzien van Quick Release.



Hiernaast staan de achterwielen weergegeven, voorzien van het Veldink4kids Veltrom remsysteem en Ergo Grip hoepels

Remmen

Standaard uitvoering met een voor de gebruiker Veltrom trommelremsysteem waarbij remhendel verlengd kan worden. Daarnaast keuze uit volgende begeleider remsystemen.

- Begeleider voetbediening in plaats van handbediening voor de gebruiker.
- Begeleider handbediening en gebruiker handbediening.
- Begeleider voetbediening en de gebruiker handbediening.



Begeleider voetbediening

Dit systeem kan goed gebruikt worden als parkeerrem en houdt de handen vrij.

Begeleider handbediening

Dit systeem kan ook gebruikt worden als parkeerrem door blokkeersysteem op de hendels (niet te zien op afbeelding)



Ergo Grip hoepels

Standaard worden onze wielen voorzien van Ergo Grip hoepels. Deze Ergo Grip is aangepast aan de natuurlijke vorm van een hand en is gemaakt van comfortabel PU-materiaal dat zachter, stroever en warmte isolerend is. Extra comfortabel voor kinderen.

Uiteraard kunnen wij de rolstoel indien gewenst uitvoeren met standaard aluminium hoepels eventueel met afstandsbus aan de velg te monteren. Tevens kunnen hierbij Tetra bedieningsknoppen gemonteerd worden.

Spaakbeschermers

Om de rolstoel optimaal naar eigen wens te personaliseren, is de keuze bijna onbeperkt voor de bedrukking van de spaakbeschermers (zie hiervoor onze website). Uiteraard kunt u zelf ook een eigen afbeelding aanleveren.

Hiernaast een voorbeeld van een Kiddo Classic met het Nederlands voetbal elftal thema inclusief bijpassende spaakbeschermers.



De anti-kantelsteunen voorkomen dat de rolstoel achterover kan kantelen. Er is keuze uit vaste en wegdraaibare beugels (met de voet te bedienen). Meestal wordt er gekozen voor wegdraaibare anti-kantel beugels. Dit is handiger bij, bijvoorbeeld, het nemen van obstakels.



Kiddo Classic

Voorwielen met of zonder stootwielen

Standaard een aluminium design voorvork uitgevoerd met twee zwarte 5" lekvrije zwenkwielen.



Om beschadigingen tegen te gaan bij botsingen kunnen de voorwielen worden voorzien van stootwielen. Deze staan rechts weergegeven.



Transferegrepen

Om de gebruiker extra steun te geven bij het in en uitstappen van de rolstoel kunnen er transfer grepen gemonteerd worden aan de voorzijde ter hoogte van de zitting.

Transport

De Kiddo Classic is zeer transportabel door de verschillende mogelijkheden om de rolstoel eenvoudig te verkleinen en/of te delen.

- Afneembare duwbeugel (weergave op vorige bladzijde)
- Afneembare rug-unit mogelijk door middel van Quick-release koppeling.
- Afneembare zit-unit: De gehele zit-unit is eenvoudig te ontgrendelen en af te nemen.
- Quick Release afneembare achterwielen.

Duwbeugel

Zeer robuuste en eenvoudig traploos in hoogte te verstellen duwbeugel (afneembaar). Zie hierboven.

E-motion wielen

De Classic is uit te voeren met diverse elektrisch ondersteunende wielen. Dit zijn actieve motorondersteuning in de wielnaven voor mensen met verminderde armkracht. Deze elektrische hoepel ondersteuning houdt de gebruiker actief. Dankzij het quick-release systeem kunnen de e-motion wielen met geïntegreerde accu's binnen een paar seconden van de rolstoel afgehaald worden.



Een simpele handeling om de complete rug-unit van de rolstoel los te koppelen.

Er kan ook gekozen worden om de complete zit-unit inclusief de rug-unit los te koppelen.

Kledingbeschermers met armsteunen

De zijschermen van de rolstoel beschermen de kleding en zorgen voor een juiste positionering. Standaard worden de zijschermen voorzien van een niet verstelbare platte gebogen armsteun (PU materiaal). Daarnaast kan worden gekozen voor in hoogte verstelbare armleggers.



Er kan gekozen worden voor de in hoogte verstelbare armleggers om de zitpositie te optimaliseren.



De wielen van de Kiddo Classic zijn makkelijk los te koppelen van de rolstoel door de Quick-release assen.

Transportbevestigingsogen

Bevestigingsbeugels gemonteerd op de rolstoel aan de voor- en achterzijde. Volgens ISO 7176-19 getest en goedgekeurd voor veilig vervoer in motorvoertuigen.

Ankle Huggers®, om de voeten te stabiliseren zonder ze te blokkeren. Dit systeem kan op de voetplaten worden gemonteerd.



Voetsteunen

Keuze uit verschillende voet- en beensteunsystemen. De doorlopende voetplaat is voorzien van een hakbeugel, en is in hoogte en hoek instelbaar. Eventueel kan er worden gekozen voor een opklapbaar systeem om meer ruimte te hebben bij het op- en afstappen.



Onze gedeelde voetsteunen kunnen worden voorzien van verschillende hak en- zijranden voor de optimale persoonlijke ondersteuning.

Voor de juiste positionering van de voeten zijn er diverse uitvoeringen leverbaar. Positionering met wreef en voorvoet in één, of alleen wreefbanden zijn mogelijk. Deze kunnen naar keuze worden uitgevoerd met een klittenband- of een tandriemsluiting.

Voetplaatssystemen



Doorlopende voetplaat

De doorlopende voetplaat is voorzien van een hakbeugel en is in hoogte en hoek verstelbaar. De maat wordt bepaald aan de hand van de framemaat.



Zowel de doorlopende voetplaat als de gedeelde voetplaat zijn in vaste en opklapbare variant verkrijgbaar. Een voorbeeld van de opklapbare variant van de doorlopende voetplaat staat onderaan de bladzijde weergegeven. Bij de gedeelde voetplaten is het ook mogelijk om het systeem te voorzien van een dynamisch verend montagesysteem.




Gedeelde voetplaten

De gedeelde voetplaten kunnen worden voorzien van verschillende hakranden en rubberen stootranden. De hoogte is per voetsteun instelbaar.



Opties voor de gedeelde voetplaten

De voetplaten zijn te verkrijgen in de onderstaande maten en kunnen worden voorzien van de volgende opties. Enkele opties zijn toegelicht in schematische weergaven.

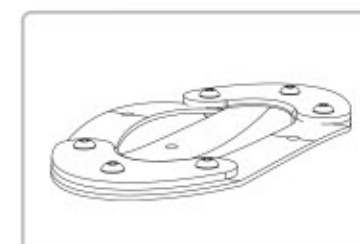

Gedeelde voetplaat


Verkrijgbaar in drie verschillende maten.

- * Gedeelde voetsteunen maat S 17cm x 6,5cm
- * Gedeelde voetsteunen maat M 20cm x 8cm
- * Gedeelde voetsteunen maat L 23cm x 10cm
- * Voetsteun met hakrand, zonder zijsteun aan de voetplaat
- * Voetsteun met hakrand met zijsteun aan buitenzijde voetplaat
- * Voetsteun met hakrand met dubbele zijsteun aan voetplaat
- * Voetsteun met rubberen stootrand aan voorzijde van voetplaat
- * Voetsteun met rubberen stootrand aan achterzijde van voetplaat




Hakrand

Hakrand om voor- en achterwaartse verplaatsing te voorkomen.

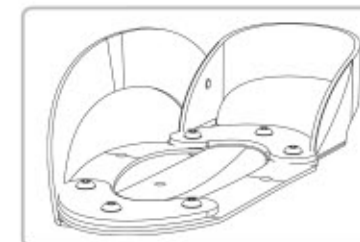

Zijsteun

Zijsteun om zijwaartse verplaatsing te voorkomen.

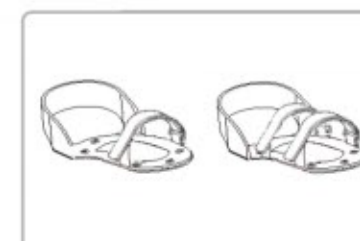

Voetfixatie

Enkele of dubbele voorvoet- en wreeffixatie om voeten goed te positioneren. Klitteband of tandriemsluiting



Positioneringsmiddelen voor gedeelde en doorlopende voetplaten

Voor de juiste positionering van de voeten zijn er diverse uitvoeringen leverbaar. Wreef en voorvoet in één, of alleen wreefbanden zijn mogelijk. Deze kunnen naar keuze worden uitgevoerd met een klittenband- of een tandriemsluiting.

Opklapbaarheid

Bij zowel de doorlopende als de gedeelde voetplaat is het mogelijk om te kiezen voor een opklapbaar-systeem. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas bij de tranfers.





Wij zijn pas tevreden als u het bent!
Wij staan open voor suggesties en zijn
altijd bereikbaar voor overleg.

Zittingen

Een optimale zitondersteuning is voor elk kind anders. Om die reden wordt ieder zitkussen individueel op maat gemaakt en is er een ruime keuze aan mogelijkheden en uitvoeringen. Eventueel uitgebreid met aanvullende zit en lichaams ondersteunende accessoires.


Standaard worden de zitkussen voorzien van een 2 laags schuim systeem voor een optimale drukverdeling en comfort. De zitting kan worden bekleed met verschillende bekleding al naar gelang de wensen. Zo is er zwarte spacermesh stof (ademend), zwart stamskin, zwart platilon of zwart neopreen.

De complete zit-unit inclusief standaard kussen staat hieronder weergegeven.



Anatomische zitting

Anatomisch gevormde zitting die zorgt voor een juiste zithouding en een goede drukverdeling en zitbalans.

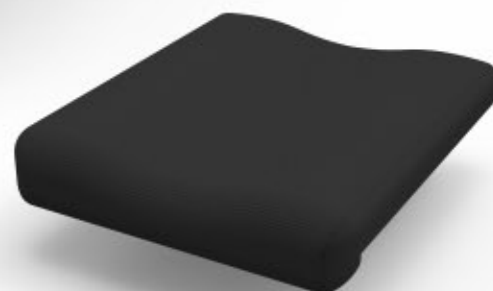

Ergozitting

Bij kinderen die de neiging hebben naar voren te schuiven kan een ergozitting helpen. Door het verlaagde zitgedeelte wordt het kind geholpen de juiste zitpositie te behouden.





Wegklapbare abductiewig

De wegklapbare abductiewig voorkomt abductie van de benen. Is eenvoudig naar onderen weg te klappen.

Daarnaast is er een ruim aantal opties voorhanden voor individuele wensen. Dit zijn o.a. het toepassen van een beenlengte verschil aan voorzijde van een zitting. Een zitting kan worden voorzien van een gesingelde zitknobbeluitsparing of een wegklapbaar gedeelte uit de zitting voor eenvoudig gebruik van een plasfles.

Paardzit / Abductie zitting:

Uitermate geschikt voor kinderen met de neiging tot sacraal zitten. (onderuit gezakt, met een naar voren hangend bovenlichaam) Door het gespreid zitten met afhangende benen creëert men een open heuphoek waardoor het bovenlichaam mooi opstrekt en de alertheid van de gebruiker zal toenemen. De zitting wordt op maat gemaakt en compleet gepolsterd en standaard voorzien van traagfoam schuim.

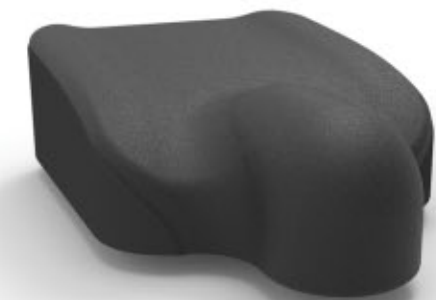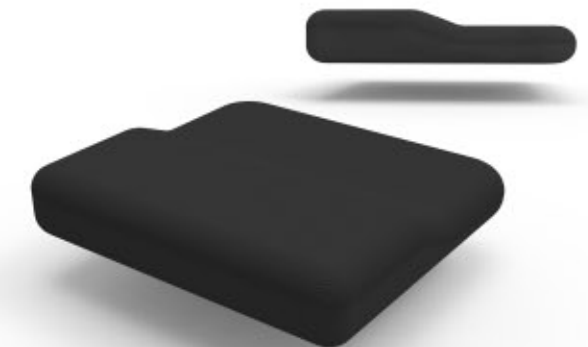

De Classic kan door een unieke connectie worden voorzien van een Tarta rug. Hierdoor kan de rug volledig ingesteld worden naar de wensen van de gebruiker.



Rugleuningen

Voor de juiste positionering en optimale ondersteuning is een perfecte rugleuning van groot belang. De keuze van de rugleuning wordt individueel bepaald en volledig op de gebruiker afgestemd.

Gedeelde rug (PU schuim)

Ergonomie was het uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze gedeelde rug. Als 2 handen die de rug 'op maat' ondersteunen en elk deel afzonderlijk perfect in te stellen en te positioneren. De rug delen uitgevoerd van PU schuim zijn in 3 maten verkrijgbaar.

1.	Maat S	b100 x h165
2.	Maat M	b125 x h205
3.	Maat L	b150 x h235

De gedeelde rugdelen staan hiernaast weergegeven op de Kiddo Classic.

Op de volgende pagina staan de op maat gemaakte rugdelen. De verschillende maten per rugdeel geven aan in hoeverre de rug te personaliseren is.



Gedeelde rug (gestoffeerd)

Volledig op maat gemaakte gedeelde rug, eventueel voorzien van geïntegreerde zij-steun. Standaard bekleed met ademende stof (zwart spacermesh afgewerkt met cordura randen).

Doorlopende rug

Doorlopende rug op maat gemaakt met geïntegreerde zij-steunen (pelotten). Standaard bekleed met ademende stof (zwart spacermesh afgewerkt met cordura randen).



Anatomische rug

Doorlopende rug, anatomisch gevormd en op maat gemaakt. Standaard bekleed met ademende stof (zwart spacermesh afgewerkt met cordura randen). Voor extra ondersteuning kan deze rug worden voorzien van wegzwenkbare of vaste zij-steunen.



Zij-steunen

Wegzwenkbare zij-steunen: Voor extra ondersteuning en veiligheid. Optimale positionering (in hoogte en breedte instelbaar) van de PU schuim pelot delen. Het systeem is zijwaarts zwenkbaar en snel en eenvoudig weg te draaien van de zijpelot tot 180graden.

Vaste zij-steunen: Voor extra ondersteuning en veiligheid. In zowel hoogte als breedte instelbaar maar niet wegzwenkbaar. PU schuim pelot delen verkrijgbaar in twee maten.



Positioneringsmiddelen

Voor de juiste ondersteuning en veiligheid bieden wij een ruime keuze aan verschillende fixatiemogelijkheden. Alle vesten en gordels zijn eenvoudig af te stellen en zijn gemaakt van ademende stoffen voor optimaal comfort. De fixaties worden gemonteerd met een fix-lock sluiting voor eenvoudig gebruik.

De perfecte ondersteuning van zowel het bovenlichaam als de juiste ondersteuning van het bekken.

Ook zijn er artikelen te verkrijgen voor de voetfixatie.

Voor de juiste positionering van de voeten zijn er diverse uitvoeringen leverbaar. Wreef en voorvoet in één, of alleen wreefbanden zijn mogelijk. Deze kunnen naar keuze worden uitgevoerd met een klittenband- of een tandriemsluiting.

Een uitgebreide beschrijving van de opties voor voetfixatie is te vinden in het hoofdstuk Voetsteunen in deze folder.



Voor de Kiddo Classic bestaan verschillende fixatiemogelijkheden

Heupgordels



Heupgordel
Gepolsterde heupgordel met kliksluiting enkel verstelbaar.



4-punts heupgordel
Gepolsterde 4-punts heupgordel met kliksluiting enkel verstelbaar.

Borst- en bekkenfixatie



Flexibel en vast vestje
Deze fixatie geeft een goede ondersteuning aan het bovenlichaam.



Flexibele en vaste zitbroek T-model
Deze fixatie voorkomt het naar voren schuiven van de gebruiker.



Flexibele en vaste zitbroek Y-model
Deze abductie en fixatie voorkomt het naar voren schuiven van de gebruiker.



Borstband
Deze fixatie geeft het bovenlichaam ondersteuning op het borstbeen.

Bevestiging

Voor het optimaal kunnen positioneren van de verschillende vestjes kan een speciale bandenspreider gemonteerd worden op de buis van het hoofdsteunverstelstelsysteem.



Het hoofdsteunensysteem van Veldink4kids kan voorzien worden van een bandenspreider om vestjes te monteren.

Hoofdsteunen

Onze verschillende soorten hoofdsteunen zorgen voor een optimale positie van het hoofd in combinatie met de juiste ondersteuning. De hoofdsteun is instelbaar in hoek, hoogte en diepte. Uiteraard maken wij, indien gewenst, ook volledig op maat gemaakte hoofdsteunen.

Ons eigen Veldink bevestigingssysteem (RVS) maakt de hoofdsteun eenvoudig instelbaar en is op elke gewenste lengte uit te voeren. Het systeem wordt eenvoudig gemonteerd op de centrale rugbuis / duwbeugel en is in zijn geheel af te nemen.

Door te kiezen voor een RVS uitvoering is de sterkte van de positie gewaarborgd. Hierdoor kan de hoofdsteun goed ingesteld worden en zal het ook altijd goed blijven zitten.




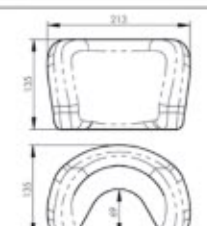

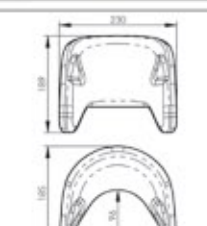

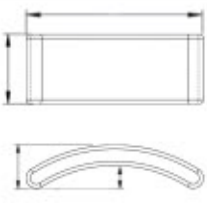


Bevestigingssysteem

Het RVS meer-puntsbevestigingssysteem kan flexibel worden gebruikt om iedere gewenste instelling (positie) te verkrijgen.

Hoofdsteunen

Keuze uit verschillende hoofdsteun modellen voor de perfecte individuele ondersteuning van het hoofd.

<p>①</p> 	<p>Hoofdsteun, standaard model van zwart PU. Maat 10cm x 22,5cm. Voor dit model is er een afneembare hoes beschikbaar uitgevoerd in zwart badstof.</p>	
<p>②</p> 	<p>Anatomische hoofdsteun, komvormig model van zwart PU. Maat 13,5cm x 21,3cm.</p>	
<p>③</p> 	<p>Hoofdsteun lateraal, komvormig model van zwart PU. Maat 18,9cm x 23cm.</p>	
<p>④</p> 	<p>Bredere hoofdsteun voorzien van foam en bekleed met zwart stamskin.</p>	





De werkbladen kunnen worden voorzien van een design afbeelding (bedrukking). Hierbij is een ruime keuze afbeeldingen aanwezig

Werkbladen

Onze werkbladen zijn individueel samen te stellen naar de behoefte van de gebruiker in verschillende materialen. U kunt echter ook een op-maat-gemaakt werkblad bestellen in de vorm die u wenst. De werkbladen kunnen worden uitgevoerd met of zonder opstaande rand. Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende opties: buik- of elleboogpolstering, speelboog en design bedrukking.

De werkbladen worden voorzien van een dubbele bevestigingsstang die onder beide armsteunen bevestigd worden (horizontaal). Dit systeem is eenvoudig in diepte in te stellen en te vergrendelen. Daarnaast is het mogelijk om bij dit systeem te kiezen voor een wegzwenkbare uitvoering (links of rechts naar keuze) waardoor het werkblad weggekanteld kan worden.




De Kiddo Classic kan uitgevoerd worden met verschillende werkbladsystemen

Werkbladsystemen

	<p>1 Afneembaar werkblad in diepte te verstellen. Voorzien van dubbele insteekbuizen (horizontaal) voor plaatsing onder de armleggers.</p>	
	<p>2 Wegklapbaar en/of afneembaar werkblad in diepte te verstellen. Voorzien van dubbele insteekbuizen (horizontaal) voor plaatsing onder de armleggers</p>	
	<p>3 Afneembaar werkblad in hoogte te verstellen (geen diepte verstelling). Voorzien van dubbele insteekbuizen (verticaal) voor plaatsing in opvangbuizen aan voorzijde zijdscherm zitting.</p>	

Werkbladen

Onze standaard werkbladen worden gemaakt van 5mm transparant slagvast polycarbonaat en voorzien van drie gebogen opstaande randen.

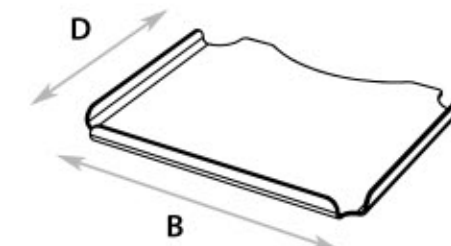

- | | | |
|----|---------------|------------------------|
| 1. | b400xd400xh40 | t.b.v. 24cm zitbreedte |
| 2. | b430xd400xh40 | t.b.v. 27cm zitbreedte |
| 3. | b460xd400xh40 | t.b.v. 30cm zitbreedte |
| 4. | b500xd450xh40 | t.b.v. 34cm zitbreedte |
| 5. | b550xd450xh40 | t.b.v. 39cm zitbreedte |

Uiteraard kunt u ook een werkbladen op maat bestellen. Deze kunnen ook worden uitgevoerd van 5mm transparant slagvast polycarbonaat met gebogen opstaande randen. Ook kunt u kiezen voor 8mm transparant slagvast polycarbonaat met of zonder opstaande randen.

Werkbladen voorzien van polstering

Voor meer comfort kunnen de werkbladen worden voorzien van polstering, bekleed met zwart stamskin.

<p>Buikpolstering</p>	<p>Verlengde buikpolstering</p>	<p>Elleboogpolstering</p>



Verende rug

Speciaal voor kinderen met ongecontroleerde bewegingen (Cerebrale Parese) kan de Classic uitgevoerd worden met een verende rug.

Door deze verende rug kan de kracht die uitgevoerd wordt op de rolstoel worden opgevangen.

De verende rug van Veldink4kids is instelbaar en vergrendelbaar doormiddel van het afstellen van de gasveer.



Veringsysteem

De veer-unit wordt geïntegreerd in de centrale rug buis van de rolstoel. De instelbaarheid van de veerkracht is eenvoudig in te stellen. Als de functie tijdelijk uitgeschakeld dient te worden kan deze in zijn geheel vergrendeld worden.

De afgebeelde schokdemper kan verschillen bij verschillende de rolstoelen. Ook kan het veringsysteem uitgevoerd worden met een luchtdemper. De luchtdemper is precies in te stellen naar de behoefte van de gebruiker.



One arm drive systemen

Kinderen met een hemiparese of een tetraparese, waarbij een arm duidelijk minder kracht en functionaliteit heeft dan de ander, hebben vaak de neiging om veel dingen éénhandig te doen. Voor deze kinderen bieden wij twee verschillende voorzieningen op de Classic. Dit is een dubbele hoepelaandrijving en een Hemi stuurgreep.

Dubbele hoepelaandrijving

Hierbij worden de achterwielen aangedreven door een centrale as die weggewerkt wordt in de dwarsbuis van het frame. De dubbele hoepel kan naar keuze zowel links als rechts gemonteerd worden.



Hemi stuurgreep

Door montage van een Hemi stuurgreep op één van de voorwielen kunnen kinderen gestimuleerd worden om hun aangedane arm en hand meer te gebruiken.

Dit kan deel uit maken van de een zogenaamd Forced Use programma. Deze kinderen waarbij één arm duidelijk meer aangedaan is dan de andere hebben vaak de neiging om veel dingen éénhandig te doen, ook wanneer het logischer is om twee handen te gebruiken. De aangedane arm en hand wordt vaak "vergeten". Terwijl de functie soms best goed is of juist door middel van de delta stuurgreep te stimuleren is.



Spreidframe



De Kiddo Classic is te verkrijgen in vele speciale uitvoeringen. Een voorbeeld daarvan is de zogenoemde spreidzit. Speciaal voor kinderen met een heupafwijking wordt een extreme spreidzit gerealiseerd waarbij de zitting en het rijframe worden aangepast aan de benodigde hoek. Het frame en de zitting worden op maat van het kind gemaakt en vaak gecombineerd met een op maatgemaakte (extra brede) abductieklos.

Om heupluxatie in de groei te voorkomen wordt vanaf twee jaar soms een spreiding van 65 graden gerealiseerd, dit wordt vaak rond het zesde jaar teruggebracht naar 45 graden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er zo'n smal mogelijke wielbasis wordt verkregen om de zelfstandigheid te behouden om makkelijk te kunnen rijden/hoepelen.

Voetsteunen

Er kan daarbij worden gekozen voor een bredere voetplaat maar meestal wordt een gedeelde voetopvang toegepast.



Kiddo Reverse

Door aanpassing van de zit-unit en het frame is de Classic om te bouwen tot een ergotherapeutisch zorgmiddel, de zogenoemde trippelstoel. Bij dit model worden ook de grote wielen voor gemonteerd om zodoende een trippelfunctie te verkrijgen.

Soms is een standaard rolstoel niet handig om bepaalde functies nog zoveel mogelijk te gebruiken en te stimuleren. Daarvoor hebben wij de Kiddo Reverse. Deze stoel combineert de rolstoelfunctionaliteiten met een trippelstoel in één. De Kiddo Reverse wordt op maat gemaakt en is uit te breiden met de juiste aanvullende zit- en lichaams ondersteunende accessoires.







Creëer je eigen rolstoel

De Kiddo Classic zal voor iedereen speciaal gemaakt worden. Dit betekent dat de rolstoel van alle functionaliteiten zal worden voorzien die de gebruiker nodig heeft. Maar ook het uiterlijk van de stoel is te personaliseren. Zo is het mogelijk om je eigen rolstoel te voorzien van een compleet thema.

Je kunt je toekomstige rolstoel helemaal naar jouw wensen creëren. Zo kan je meerdere kleuren kiezen voor het rijframe en kan de rolstoel voorzien worden van alle opties die de je nodig hebt.

Zelfs de opties kunnen nog gepersonaliseerd worden. Zo kunnen de spaakbeschermers worden voorzien van jouw eigen afbeeldingen. Zodoende kan je de rolstoel in een compleet thema uitvoeren.

Uiteindelijk krijg je een afbeelding van je toekomstige rolstoel die je alvast kan delen met bekenden op social media.

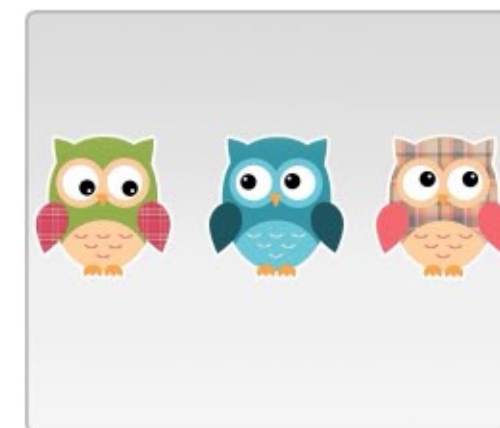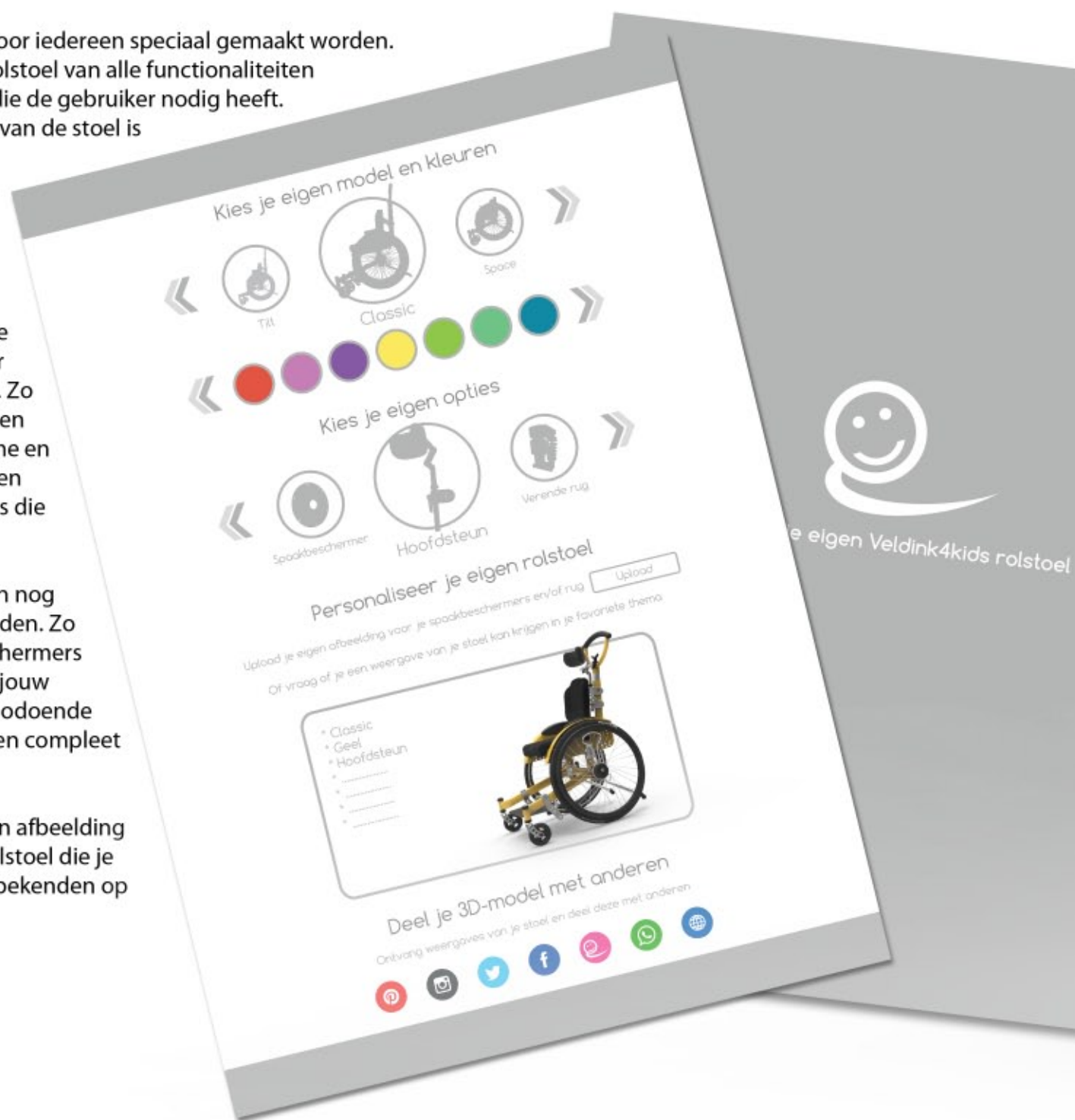

Opties4kids

no limits

Individualiteit, jezelf onderscheiden, jezelf laten zien en deel uit maken van het geheel. Creëer je eigen Classic geheel naar eigen gevoel. Samen maken we een unieke stoel!



Classic

Kiddo by Veldink



ANGRY BIRDS



P X A R

