

Invacare® Matrix® Flo-tech®
Zitkussens / Coussins d'assise



Yes, you can.®

***"Less back and more support.
I can sit longer and play harder. I love it!"***

Allen McKinley



Invacare® | **Matrix® Flo-tech®**

**Zitkussens /
Coussins d'assise**

<i>Invacare</i> Matrix Flo-tech Lite Visco	4
<i>Invacare</i> Matrix Flo-tech Contour Visco	6
<i>Invacare</i> Matrix Flo-tech Image	8
<i>Invacare</i> Matrix Flo-tech Solution Xtra	10

Invacare®

Matrix® Flo-tech® Lite Visco



Origineel concept! / Conception originale!

Het **Matrix Flo-tech Lite Visco** zitkussen is samengesteld uit een basisfoam met een densiteit van 40 kg/m³ en een viscoelastische mousselaag van 80 kg/m³ met vormgeheugen. De basis in mousse voorkomt het risico op spoorvorming, zowel bij zwaarlijvige als bij hele magere mensen. De viscoelastische mousse zorgt voor een goede ondersteuning van de lichaamsdelen die in contact zijn met de zitsteun en vermindert zo de drukpunten. / *Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.*



Yes, you can.®



Vele inkepingen voor meer comfort!

De bekleding van het **Matrix Flo-tech Lite Visco** zitkussen is uitgerust met inkepingen om het eventuele hangmateffect tegen te gaan, net zoals de inkepingen ter hoogte van het frame de zitdiepte moeten optimaliseren. Een gebogen gietvorm zorgt voor een goede zithouding met abductieklos en zijdelingse steun. Het **Lite Visco** zitkussen is vormvast verkrijgbaar voor een maximaal gebruikersgewicht tot 100 kg om spoorvorming te vermijden.

De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Le coussin **Matrix Flo-tech Lite Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet Hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral. Le coussin **Lite Visco** est disponible en portance ferme pour un poids patient maximum de 100 kg afin de prévenir les risques de talonnement.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant

Uitgerust met bevestigingsgordel / Equipé d'une sangle de pré-hension.

Foambasis met hoge dichtheid van 40 kg/m³, bedekt met visco-elastische mousse van 80 kg/m³ met vormgeheugen. /

Base en mousse haute résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³.

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Lite Visco

Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
 380 mm 405 mm
 405 mm 430 mm
 430 mm 455 mm
 455 mm


55 mm

Vanaf / A partir de
 1.26 kg

Max. 100 kg

Wasmachine / Lavage machine
 80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement

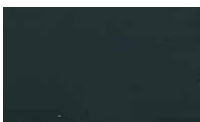

Zwart / Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Contour Visco**



Origineel concept! / Conception originale!

Het **Matrix Flo-tech Contour Visco** zitkussen is samengesteld uit een basisfoam met een dichtheid van 40 kg/m^3 en een viscoelastische mousselaag van 80 kg/m^3 met vormgeheugen. De basis in mousse voorkomt het risico op spoorvorming, zowel bij zwaarlijvige als bij heel magere mensen. De viscoelastische mousse zorgt voor een goede ondersteuning van de lichaamsdelen die in contact zijn met de zitsteun en vermindert zo de drukpunten. /

*Le coussin **Matrix Flo-tech Contour Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m^3 recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m^3 . La base en mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.*



Yes, you can.®



Vele inkepingen voor meer comfort! /

De kussens van de **Matrix Flo-tech Contour Visco** zijn verkrijgbaar in 2 verschillende maten: **Contour Visco** en **Contour Visco** voor comfortzetels. Het **Contour Visco** kussen is uitgerust met inkepingen in de bekleding om het eventuele hangmateffect tegen te gaan, net zoals de inkepingen ter hoogte van de rugbuizen de zitdiepte moeten optimaliseren. De juiste zithouding wordt verzekerd door een gebogen gietvorm met abductieklos en zijdelingse steun.

De multiples découpes

Les coussins **Matrix Flo-tech Contour Visco** sont disponibles en 2 formes différentes: **Contour Visco** et **Contour Visco** pour fauteuils de confort. Le coussin **Contour Visco** est équipé de quelques découpes pour compenser l'effet Hamac éventuel de la toile, ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant

Uitgerust met bevestigingsgordel. / Equipé d'une sangle de pré-hension.

Specifiek model voor comfortstoelen Rea® Azalea® en Clematis® / Modèle spécifique pour fauteuil de confort Rea® Azalea® et Clematis®

Verkrijgbaar in 4 maten, diepte 530 mm, stevige basis. / 4 tailles disponibles, profondeur 530 mm, portance ferme.

Twee foamdensiteiten / Deux densités de mousse

Vast (max. gebruikersgewicht 100 kg) en heel vast (max. gebruikersgewicht 125 kg). / Ferme (poids patient max 100 kg) et très ferme (poids patient max 125 kg).

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Contour Visco

Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
 355 mm 405 mm
 405 mm 430 mm
 430 mm 455 mm
 455 mm 530 mm
 480 mm 560 mm
 505 mm
 600 mm


90 mm

Vanaf / A partir de
1,60 kg

Max. 125 kg

Wasmachine /
Lavage machine
80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement

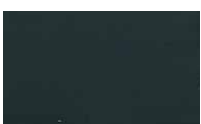

Zwart / Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Image**



Stabiliteit en preventie! / Stabilité et prévention !

Het **Matrix Flo-tech Image** kussen bestaat uit een visco gelzakje bovenop een dichte foambasis van 70 kg/m³. Het ontwerp van de foambasis is gevormd om een goede positie van de dijen en een stabiele zithouding te garanderen. Het verzonken heupgedeelte wordt opgevuld met een gelzak en biedt zo een grotere en betere contactzone. Voor gebruikers met een hoog decubitusrisico. /

*Le coussin **Matrix Flo-tech Image** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. Le design de la base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres.*



Yes, you can.®



Origineel Concept

Het design van dit kussen is ontworpen voor een betere aanpassing van het kussen aan de stoel: inkepingen in de zitbekleding en ter hoogte van het frame aan de rugzijde compenseren het hangmateffect en maximaliseren de diepte van de stoel.

Conception Originale

Le design du coussin **Image** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant : découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac de la toile d'assise, découpe tube de dossier pour maximiser la profondeur du fauteuil.

Kenmerken / Caractéristiques



Waterdichte en waterafstotende zitbekleding / Revêtement imperméable et déperlant


Uitgerust met bevestigingsgordel. / Equipé d'une sangle de pré-hension.

Zakje met vloeibare gel / Poche en gel fluide

Laat een betere verdeling van de drukpunten toe. Zak met compartimenten om de stabiliteit van het bekken te behouden. / Permet une meilleure répartition des points de pression. Poche compartimentée pour conserver la stabilité du bassin.

Antibacteriële Ultra Fresh™ behandeling / Traitement antibactérien Ultra Fresh™

Bepoort de toename van bacteriën en maakt de foam meer bestand tegen geuren en schimmels. / Limite la prolifération des bactéries et rend la mousse plus résistante aux odeurs et moisissures.

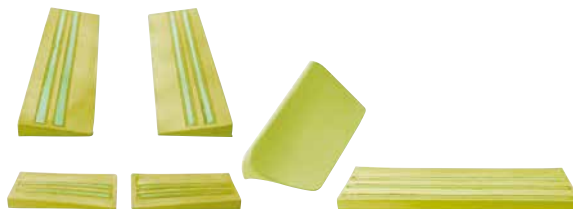

Positioneringskussens / Cales de positionnement

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Image

Breedte / Largeur : Diepte / Profondeur :
 405 mm 405 mm
 430 mm 430 mm
 455 mm 455 mm
 480 mm
 500 mm

60 mm

Vanaf / A partir de 1.82 kg

Max. 140 kg

Wasmachine / Lavage machine 80°

Kleur bekleding / Coloris du revêtement



Zwart / Noir

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Solution Xtra**




Het **Solution Xtra** kussen bestaat uit een visco gelzakje bovenop een foambasis van 70 kg/m³ dichtheid. De gelzak is onderverdeeld in verschillende compartimenten om spoorvorming te voorkomen. De vloeibare gel garandeert een stabiele zithouding en voorkomt decubitus in sterke mate. De **Ultra Fresh™** behandeling is ook op het **Matrix Flo-tech Solution Xtra** kussen van toepassing. Deze behandeling beperkt de toename van bacteriën en maakt het kussen beter bestand tegen geuren en schimmels. /

*Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel prévient les risques de talonnement et assure un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant la prévention d'escarres pour risque élevé. Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Matrix Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.*



Yes, you can.®

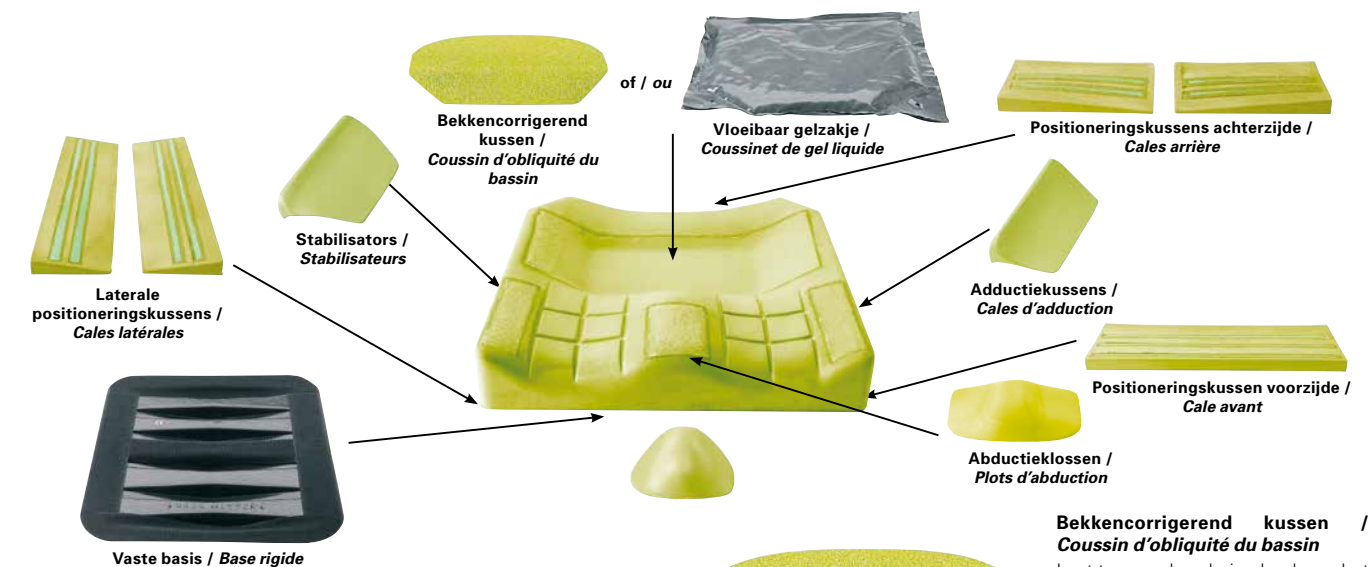

AP1487157

Positioneringskussens voorzijde / Cale avant

Helpt het bekken te stabiliseren. Maakt het mogelijk om de zithoek te bepalen. Compatibel met **Image & Solution Xtra**. / Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487162/AP1487163

Abductieklossen / Plots d'abduction

Optimaliseert de positie van de dijbenen en voorkomt dat de binnenzijden van de knieën tegen elkaar wrijven. Behoudt de heupgewrichten in een goede positie. Bestaat in twee maten. Compatibel met **Solution Xtra**. / "Finalise" l'alignement des 2 fémurs et empêche les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintient les articulations des hanches dans une bonne position. Existe en 2 tailles. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487164

Vaste basis / Base rigide

Bestrijdt het hangmateffect. Stabiliseert het bekken op een horizontaal vlak. Compatibel met **Image & Solution Xtra**. / Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487165

Laterale positioneringskussens / Cales latérales

Verbeteren de laterale stabiliteit. Bevorderen de interne rotatie van de heupen. Compatibel met **Image & Solution Xtra**. / Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487155



AP1487166

Bekkenkorrigerend kussen / Coussin d'obliquité du bassin

Laat toe om de schuine hoek van het bekken te corrigeren of te volgen. Compatibel met **Image & Solution Xtra**. / Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**

Vloeibaar gelzakje / Coussinet de gel liquide

Beperkt de druk op het zitbeen wanneer naar voor wordt gegleden. Ideaal om een lichte schuine hoek van het bekken te volgen of tegen te gaan. / Limite la pression sur les ischions en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487158

Positioneringskussens achterzijde / Cales arrière

Voorkomen de externe rotatie van de heupen. Helpen bij de positie van de dijbenen. Compatibel met **Image & Solution Xtra**. / Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487160

Adductiekussens / Cales d'adduction

Verminderen de abductie en de externe rotatie van de heupen door de positie van de dijbenen te aligneren. Stabiliseren de dijbenen. Compatibel met **Solution Xtra**. / Réduit l'abduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs. Stabilisent les fémurs. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487161

Stabilisators / Stabilisateurs

Bevorderen de houding van de heupen. Begeleiden de positie van de dijbenen in de lengte van het zitkussen. Stabiliseren het bekken. Compatibel met **Solution Xtra**. / Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin. Compatibles **Solution Xtra**

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Matrix Flo-tech Solution Xtra

Breedte / Largeur : 360 - 600 mm



Diepte / Profondeur : 330 - 550 mm



Hoogte / Hauteur : 60 mm



Gewicht / Poids : Vanaf / A partir de 3,08 kg



Max gebruikersgewicht / Poids max : 140 kg



Wasmachine / Lavage machine : 80°

Technische gegevens / *Caractéristiques Techniques*



Breedte /
Largeur



Diepte /
Profondeur



Hoogte /
Hauteur



Gewicht /
Poids



Max. gebruikers-
gewicht /
Poids Max. Utilisateur*



Bekleding wasbaar op /
Revêtement
lavable à

	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur	Hoogte / Hauteur	Gewicht / Poids	Max. gebruikers- gewicht / Poids Max. Utilisateur*	Bekleding wasbaar op / Revêtement lavable à
Matrix Flo-tech Lite Visco	380 - 455 mm	405 - 455 mm	55 mm	1,26 kg	100 kg	80°
Matrix Flo-tech Image	355 - 600 mm	405 - 560 mm	90 mm	1,60 kg	125 kg	80°
Matrix Flo-tech Contour Visco	405 - 500 mm	405 - 455 mm	60 mm	1,82 kg	140 kg	80°
Matrix Flo-tech Solution Xtra	360 - 600 mm	330 - 550 mm	60 mm	3,08 kg	140 kg	80°

* Het maximale gebruikersgewicht wordt vastgelegd in de veronderstelling dat het gekozen kussen een adequate diepte en lengte heeft, aangepast aan het gebruik. /

* Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées à l'utilisation prévue

Geproduceerd volgens de Europese Normen / *Fabriqués selon les Normes Européennes:*
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Matrix Flo-tech - BE - 04/2013



Yes, you can.®