

ATTITUDE
PURE VRIJHEID



WHAT'S YOUR ATTITUDE?

ERVAAR VRIJHEID ALS NOOIT TEVOREN MET DE NIEUWE QUICKIE ATTITUDE AANKOPPELFIETS.

Of je nu wilt gaan sporten of je mobiliteit wilt vergroten, er is altijd een Attitude die perfect bij jou past. De Manual versie is licht van gewicht en sportief. Wil je tijdens het rijden elektrische ondersteuning? Dan is de Hybrid versie echt iets voor jou! Heb je toch liever een volledig elektrische versie, dan is dit geen probleem met de Power versie.



ATTITUDE Manual





ATTITUDE Hybrid



ATTITUDE Power



AANKOPPELEN IN EEN PAAR SECONDEN

De Attitude heeft een slim innovatief aankoppelmechanisme waarmee je binnen enkele seconden eenvoudig je Attitude kan aan- of afkoppelen. Ideaal als je geen tijd wilt verliezen of als je haast hebt.

Het aankoppelmechanisme op de Quickie Attitude is eenvoudig en zit stevig aan de voorzijde van de rolstoel vergrendeld. Omdat er geen extra koppeling nodig is, gaat er geen kostbare ruimte verloren. Niets staat jou en het comfort in de rolstoel in de weg.

Na het afkoppelen blijven twee kleine pinnen op de rolstoel achter die slechts 170 gram wegen


- 1 De Attitude aan de pinnen koppelen op de rolstoel
- 2 Draai het aankoppelmechanisme naar beneden
- 3 Vergrendel de Attitude door de rode hendel naar achteren te trekken



1



2

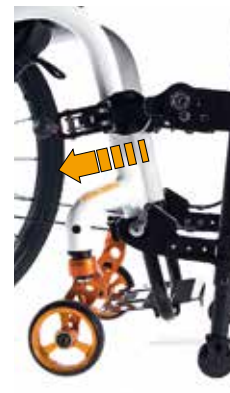

3




→ Hier staat het filmpje klaar om afgespeeld te worden!
CHECK IT OUT!



KIES JE IDEALE CRANK POSITIE

Met de nieuwe diepte- en hoekinstelling van de Attitude Manual en Hybrid ben je verzekerd van een ideale ergonomische crank positie. De juiste afstelling zorgt voor een energie-efficiënte rijervaring en geeft de vrijheid om zelfs lange afstanden probleemloos af te leggen

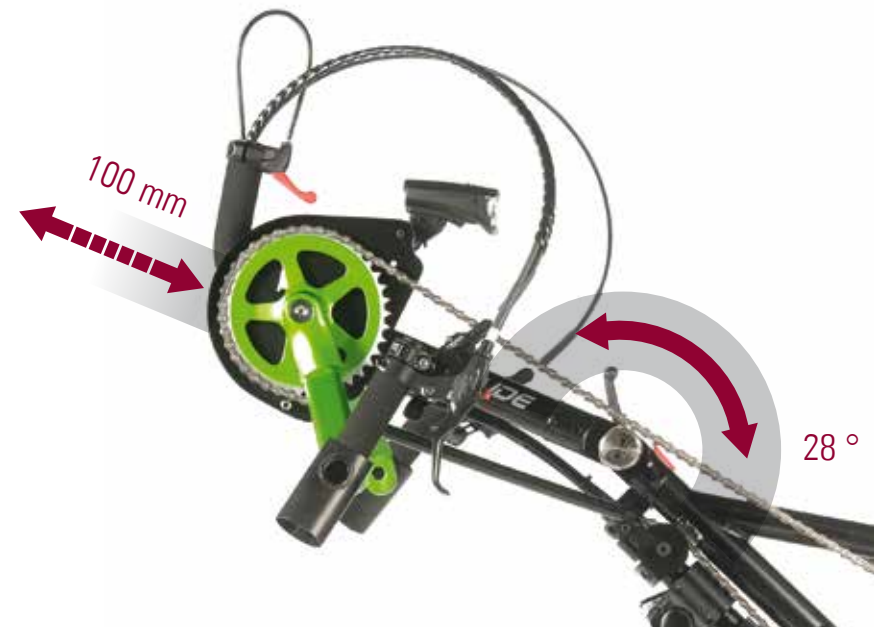

MANUAL

De Manual is ideaal voor jou als je meer kracht wilt opbouwen en/of je uithoudingsvermogen wilt verbeteren door middel van recreatief fietsen.

Het 20" voorwiel en de derailleur met 30 versnellingen bieden uitzonderlijke rijprestaties! De Attitude Manual is licht van gewicht en makkelijk wendbaar, de perfecte aanvulling op jouw rolstoel.



In diepte- en hoek instelbare crank positie.



ATTITUDE

Manual



MANUAL | HYBRID | POWER



// VERSNELLING 3X10

De derailleur met 30 versnellingen is perfect voor alle terreinen. Met de schijfrem is het eenvoudig om je snelheid te regelen.



// TRIGGER SHIFT

Met de trigger shift aan het handvat is het soepel schakelen tijdens het rijden, daarnaast is de trigger shift eenvoudig met één hand te bedienen.



// KIES JE EIGEN STIJL

De crank en de kettingbeschermer is uit te voeren in verschillende kleuren.



// PARKEERREM

Een makkelijk werkende parkeerrem met vastzetfunctie, dit zit standaard op elke Attitude aankoppelfiets.

HYBRID

De Hybrid combineert de voordelen van zelfstandig fietsen met de betrouwbaarheid van de elektrische ondersteuning. Hulp nodig bij het fietsen? De elektrische ondersteuning kan eenvoudig worden ingeschakeld wanneer jij het nodig hebt. Dit is vooral handig bij tegenwind, steile hellingen of gewoon wanneer je meer snelheid wilt maken!



In diepte- en hoek instelbare crank positie.



ATTITUDE

Hybrid



// LITHIUM-ION-ACCU

De Hybrid heeft een 17.5 Ah Lithium-ion-accu welke energie opwekt tijdens het fietsen. Hierdoor heb je een grotere actieradius. De fietscomputer geeft de resterende accucapaciteit aan via de accu-indicatiemeter op het scherm.



// KRACHTIGE 250 WATT MOTOR

De krachtige 250 Watt motor heeft een topsnelheid van 25 km per uur en is ideaal voor heuvelachtig terrein of voor lange afstanden.



// ALLES ONDER CONTROLE

Met de MMI van Neodrive heb je altijd alle gegevens bij de hand zoals snelheid, afstand of resterende accucapaciteit.



// ERGONOMISCHE V-CRANK

De positie van de ergonomische handgreep voorkomt contact met het lichaam, dit is vooral te merken bij het nemen van scherpe bochten.

POWER

De Power aankoppelfiets is krachtig, waardoor je makkelijk off-road kan rijden of met gepaste snelheid door de straat heen kan cruisen. Je kan comfortabel en relaxt in je rolstoel blijven zitten, je hoeft alleen maar de gashendel open te draaien om vooruit te komen. Zoek je grenzen op en ga overal naar toe met de Attitude Power!



ATTITUDE

Power



// KRACHTIGE 250 WATT MOTOR

De krachtige onderhoudsvrije motor is stil en heeft een topsnelheid van 23 km/u!



// INSTELBAAR STUUR

Het ergonomische stuur is traploos in hoogte instelbaar via de stem. Het scherm van de fietscomputer toont een scala aan informatie, zoals de snelheid, rijtijd, rijafstand, totaal aantal kilometers, snelheidsmodus, etc.



// LITHIUM-ION-ACCU

Een 9 of 13,4 Ah Lithium-ion-accu voor een grote actieradius. De Lithium-ion-accu's hebben een hoge energiedichtheid en geen geheugeneffect (capaciteitsvermindering bij het laden van een niet-lege accu).



// VOORVERLICHTING

De heldere koplamp is direct aangesloten op de accu.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<i>ATTITUDE</i>	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
Voorframe breedte (+20mm):	260 - 460 mm	260 - 460 mm	260 - 460 mm
Crankbreedte:	470 mm	470 mm	-
Cranklengte:	170 mm	170 mm	-
Stuurbreedte:	-	-	570 mm
Shifter:	Trigger shift of Grip shift	Trigger shift of Grip shift	-
Versnelling:	8 of 3x10	10	-
Wielmaat:	20"	20"	16"
Rem:	Schijfrem (180 mm)	Schijfrem (180 mm)	Schijfrem (180 mm)
Parkeerrem:	Ja	Ja	Ja
Maximale snelheid:	-	23 km/u	6, 10, 15 of 23 km/u
Actieradius (ISO 7176-4):	-	120 km*	30 of 50 km*
Accu:	-	17,5 Ah	9 of 13,4 Ah
Motor:	-	250 W	250 W
Gewicht aankoppelpinnen:	170 gr	170 gr	170 gr
Totaalgewicht:	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Maximale gebruikersgewicht:	100 kg	100 kg	100 kg
Kleur (frame, crank, kettingkast):	3x 31 combinaties	3x 31 combinaties	1x 31 combinaties

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weersomstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be