

UITGEVOERD DOOR

VÖLKER

VOLKER MATRASSEN



Originele Völker-matrassen. Liggen op het hoogste niveau

Originele Völker-matrassen zijn uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen. Ze bieden patiënten een maximaal slaap- en ligcomfort. Bovendien voldoen deze matrassen aan alle vereisten op het vlak van hygiëne, iets wat met name in de zorg enorm belangrijk is. Momenteel kunnen er vier modellen worden geleverd, met elk andere kenmerken. Op die manier kunt u een matras uitkiezen dat het meest optimaal is voor uw situatie. Alle matrassen van Völker worden uitsluitend volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd, zowel wat betreft materiaalkeuze als wat betreft het productieproces. Deze kwaliteit wordt kenbaar gemaakt door middel van verschillende kwaliteits- en testkeurmerken, en is ook aangetoond in vele rapporten van experts.

Mobiliteit

Een Völker matras is gemaakt om comfortabel te liggen en te zitten in bed. Het volgt de alle bewegingen van het bed optimaal en is ook bij langdurige ligduur comfortabel. Maar daar blijft het niet bij.

Alle Völker matrassen zijn voorzien van de zogenaamde uitstaprand. Het randgebied is over de hele lengte van het matras extra verstevigd en biedt daardoor meer veiligheid. De patiënten blijven hierdoor beter midden in het matras liggen en ook bij verwarde patiënten werkt de verstevigde rand als een onzichtbare partner. Tevens kunnen patiënten door de verstevigde rand veilig en gemakkelijk in en uit het bed stappen. De patiënt kan niet uit bed glijden.

Reanimeren en fixeren

Alle Völker matrassen zijn in combinatie met de gangbare ligvlakken, geschikt voor reanimatie en fixeren van patiënten.

Ligvlak in combinatie met een matras

De Völker matrassen Comfort 2000 en Visco 4000 zijn zeer hoogwaardige matrassen. Deze matrassen kunt u in ieder ziekenhuisbed gebruiken, maar het kan nog beter.

In combinatie met onze gepatenteerde ligvlakken heeft u de allerbeste bescherming tegen decubitus!

Het MiS[®] systeem neemt zelfs de meest minimale bewegingen van de patiënt waar en geeft ze als tactiele prikkels vanaf het ligoppervlak door de matras weer aan het lichaam terug. Dit kunt u direct zien als u druk geeft op een van de “vlinders” te drukken. De vlinder geeft mee en de andere zijde beweegt omhoog. Deze constante terugkoppeling zorgt voor een beter lichaamsbewustzijn, ondersteunt de bewegingen van de patiënt en verbetert de doorbloeding van de huid. Het ligvlak is opgebouwd uit “MiS[®] vlinders” die per houder over de gehele breedte van het bed zijn geplaatst. Iedere houder heeft zijn eigen stijfheid en zorgt zo voor een optimaal ligvlak.

Dit zorgt niet alleen voor een goede nachtrust, waardoor de patiënt uitgerust aan zijn of haar dag kan beginnen, maar ook voor een verminderde kans op onrust of delier.

Brengt u dit in combinatie met een van onze vier matrassen, dan kunnen we een antidecubituspreventie en therapie bieden voor alle niveaus!

Tevens heeft Völker een HPL- ligvlak in vier delen beschikbaar voor u. Ook deze is gemonteerd met veren aan de zijdes, waardoor het nog steeds een zeer goed comfort biedt. De preventie van dit ligvlak is weliswaar minder groot maar nog steeds heel veel beter als een stijf of stalen ligvlak.



Sleutelproduct kenmerken van alle Völker matrassen

Overtrek

- ✓ Kleur: grijs
- ✓ Textieldrager: 100% polyester,
- ✓ Vochtbarrière: 100% polyurethaan
- ✓ 2 draaihandvaten voor verplaatsen van het matras
- ✓ Eenzijdig gebruik, logo voeten zichtbaar en ten hoogte van voeten
- ✓ Bi-elastisch
- ✓ Bacterie-, virus- en mijtdicht
- ✓ Geschikt voor personen met allergieën
- ✓ Antibacteriële coating: Preventol MP100 van Lanxess
- ✓ Water- en urinedicht
- ✓ Brandvertragend conform UNI 9175: klasse 1M + BS 7175 crib5
- ✓ Bestand tegen bloed, urine, olie en vet
- ✓ Bestand tegen desinfectiemiddelen conform VAH en RKI
- ✓ Wasbaar op 95 °C
- ✓ Autoclaveerbaar tot 105 °C
- ✓ Oppervlaktegewicht: 190 g/m² ± 10
- ✓ Waterkolom conform UNI EN 20811 > 200 cm
- ✓ Doorlaatbaar voor waterdamp conform DIN 53122 500 g/m²/24 u
- ✓ Ritssluiting over de volledige lengte en beide breedten
- ✓ Afneembare overtrek

Goedkeuringen en certificaten

- ✓ ISO 9001:2008
- ✓ ISO/TS 136949:2009
- ✓ Öko-Tex: klasse 1, producten voor baby's
- ✓ Biocompatibel conform ISO 10993-10
- ✓ Brandvertragend conform DIN 597 1+2 en BS 7175
- ✓ Water- en urinedicht
- ✓ Bacterie-, virus- en mijtdicht
- ✓ Druktest door BerlinCert
- ✓ Bestand tegen desinfectiemiddelen
- ✓ Latexvrij
- ✓ Maximaal patiënten Gewicht: 195 kg
- ✓ Eigen gewicht ca. 9,8 kilogram
- ✓ Keuze uit 12 of 14 cm dikte
- ✓ Makkelijk stapelbaar

Product kenmerken Völker Comfort 2000

Völker Comfort 2000


- Hoogelastische HR-koudschuimmatras, opgebouwd uit twee lagen.
- De speciale, kubusvormige snijtechniek in het ligvlak zorgt voor een goede aanpassing aan het lichaam en vermindert de steundruk. De kubussen werken onafhankelijk van elkaar, bevorderen de luchtcirculatie en zorgen ervoor dat er minder ophoping van vocht plaatsvindt. Daardoor wordt voorkomen dat de huid geïrriteerd raakt en zijn de dwarskrachten kleiner.
- De hielzone bevat een speciaal ontlastingsgebied en biedt ondersteuning aan hielen en enkels.
- Het randgebied is extra verstevigd en biedt daardoor meer veiligheid. Ook kunnen patiënten en bewoners daardoor gemakkelijker in en uit het bed stappen.
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
- Als **preventiemaatregel** voor personen met een verhoogd risico op decubitus en als **therapie** voor personen met een decubitusrisico 1-2 of categorie III volgens de EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Getest door BerlinCert. **Klasse D** op een schaal van A tot H. (H is het hoogst haalbare)



Het alternatief op luchtwisselsystemen en geschikt voor patiënten met een verhoogd risico op decubitus

Productkenmerken Völker Visco Pro 4000

- Hoogelastische HR-koudschuimmatras, opgebouwd uit drie lagen.
- Een 4 cm dikke visco-elastische, druk verminderende bovenlaag
- Een 6 cm dikke middenlaag van koudschuim die de druk verdeelt
- Een 4 cm dikke dragende onderlaag van koudschuim
- Ligvlak van speciaal visco-elastisch schuim dat zich aanpast aan de contouren van het lichaam en de steundruk vermindert.
- De hielzone bevat een speciaal ontlastingsgebied en biedt ondersteuning aan hielen en enkels.
- Het randgebied is extra verstevigd en biedt daardoor meer veiligheid. Ook kunnen patiënten en bewoners daardoor gemakkelijker in en uit het bed stappen.
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
- Als **preventiemaatregel** voor personen met een verhoogd risico op decubitus en als **therapie** voor personen met een decubitusrisico 1-4 of categorie III volgens de EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Getest door BerlinCert. **Klasse H** op een schaal van A tot H. (H is het hoogst haalbare) Getest door BerlinCert.

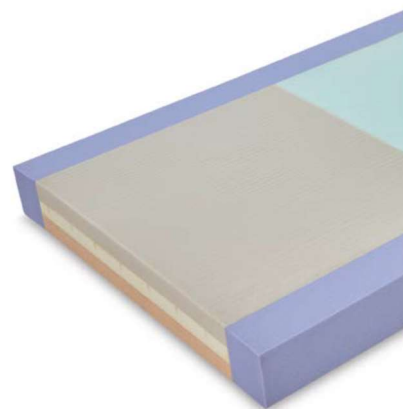

REINIGING VAN MATRASSEN

De matrassen van Völker zijn zeer hoogwaardig afgewerkt en glad. Hierdoor zijn ze zeer goed te reinigen. De handels aan de zijdes van het matras zorgen ervoor dat u het matras eenvoudig kunt optillen en aan de onderzijde kunt reinigen. Ook is het soepel waardoor het dubbel te klappen is en zo aan de onderzijde te reinigen is. Door het lage gewicht van slechts 9,8 kilogram is het verplaatsen een eenvoudige opgave.

De matrassen zijn voorzien van een rits over een lengte en de twee zijdes. Bij beschadigingen kunt u de hoes eenvoudig en kosten efficiënt vervangen voor een nieuwe hoes.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad adviseren wij de reiniging van de matrassen met een vochtige (microvezel) doek.

Wis- en sproei-ontsmetting

Voor de wis- en sproei-ontsmetting kunnen de in de VAH-lijst (Verbund für angewandte Hygiene e.V.) vermelde ontsmettingsmiddelen in hun gepaste concentratie worden gebruikt. Daarbij moet de door de fabrikant in de betreffende gebruiksaanwijzing aanbevolen verdunningsverhouding worden nageleefd.

OPMERKING Het gebruik van oplosmiddelen is niet toegestaan. Schuurmiddelen, schuursponsjes of andere afstompende stoffen mogen niet worden gebruikt. Organische oplosmiddelen zoals gehalogeneerde/ gearomatiseerde koolwaterstoffen en ketonen mogen niet worden gebruikt.

De volgende richtlijnen dienen te worden nageleefd bij het gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen:

- De gebruiksooplossingen mogen normaal uitsluitend worden gebruikt net nadat ze werden bereid.
- De gebruikte concentraties mogen niet hoger noch lager zijn dan de in de lijst vermelde concentraties. De zogenaamde „scheut“-methode mag onder geen enkel beding worden toegepast. De gebruiker mag in geen geval naar eigen goeddunken reinigingsmiddelen zoals bijv. zeep of wasactieve stoffen toevoegen aan het ontsmettingsmiddel.
- Bij alcoholhoudende sproei-ontsmettingsmiddelen bestaat explosie- en brandgevaar bij toepassing op grote vlakken.
- Ze mogen geen corrosieve of bijtende bestanddelen bevatten.
- Ze mogen geen stoffen bevatten die de oppervlaktestructuur of de hechtingseigenschappen van de materialen wijzigen.
- Smeerstoffen mogen niet worden aangetast.
- De ph-waarde van het water mag niet lager of hoger zijn dan 6-8.
- De totale waterhardheid mag niet hoger zijn dan 0.9 mmol/l (overeenkomstig 5 ° dH).

De gegevens in de VAH-lijst alsook de door ons verstrekte gegevens ontslaan de gebruiker niet van eigen tests en proeven, aangezien de omstandigheden (bijv. waterhardheid) plaatselijk kunnen verschillen. Een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.

Bij gebruik van ongeschikte was- en ontsmettingsmiddelen, bij een niet correcte mengverhouding en bij een gebrekkige verzorging van de matrassen kan er schade ontstaan aan de afwerkingslaag, waarvoor de firma Völker GmbH niet aansprakelijk kan worden gesteld.