

 **TOPRO**

# Premiun Walkers

Taurus, Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro



NL

made in Norway



# TAURUS

VEILIGE EN STABIELE WALKER

De TOPRO Taurus biedt optimale ondersteuning voor gebruikers met beperkte mobiliteit. De walker is stabiel en veilig voor gebruik thuis en in een zorgomgeving. Er zijn vier verschillende modellen beschikbaar: Basic- en Premium-versies met hydraulische hoogteverstelling en Basic- en Premium-versies met elektrische hoogteverstelling. De premium-modellen hebben een rij- en parkeerrem op beide handgrepen en een richtingfixatie op de achterwielen.

- **Eenvoudig in te stellen** aan de specifieke ergonomische vereisten van de gebruiker – denk hierbij aan de lengte, maar ook het gewicht en de stand van de armen.
- De walker kan worden gebruikt bij opstaan uit bed of uit een stoel.

- Op Premium modellen kunnen de **handgrepen worden ingesteld** op de gewenste positie.
- **Antislipwielen** voor gemakkelijk en veilig manoeuvreren. Alle vier de wielen zijn voorzien van voetremmen.
- De Premium modellen hebben een

**vergrendelbare positie voor het zwenkgedeelte van de achterwielen**, omdat alle wielen zijn uitgerust met vergrendelbare remmen. Bovendien kan een **handrem** worden gebruikt om de persoonlijke, gewenste duwsnelheid in te stellen.

- De TOPRO Taurus is een veelzijdig walker die aan de individuele gebruiker kan worden aangepast dankzij een hydraulische of elektrische functie voor hoogtafstelling. **Instelbare steunen voor de onderarmen** en een groot assortiment accessoires maken dat dit een ideale walker is.
- De walker is **hoog genoeg voor lange gebruikers** (maximaal 210 cm) en is geschikt voor gebruikers tot 150 kg.

Nieuwe kenmerken, verschillen tussen modellen, productgegevens en afmetingen vindt u op de volgende pagina's en op pagina 13.

Lees meer online op onze website



Links de TOPRO Taurus H Basic, rechts de TOPRO Taurus E Premium.



made in Norway



## Gegevens en kenmerken



De premium modellen hebben één hendel voor gebruik van rij- en parkeerrem op beide handgrepen.



De handgrepen van Premium modellen kunnen gemakkelijk worden bijgesteld.



Onbepikt instelbare steunen voor de onderarmen.



Geïntegreerde richtingsvergrendeling voor het zwenkgedeelte (gemakkelijk met de voet te bedienen) op de Premium modellen. Voetremmen op alle wielen en modellen.



Schakelaar voor elektrische hoogteafstelling op de Taurus E.

Met een traploos verstelbare hoogteverstelling. Dankzij de schaalverdeling vindt u de juiste positie snel terug.

## Verschillen tussen de modellen

	TOPRO Taurus H Basic	TOPRO Taurus H Premium	TOPRO Taurus E Basic	TOPRO Taurus E Premium
Rij- en parkeerrem op beide handgrepen	✗	✓	✗	✓
De remmen kunnen onafhankelijk van elkaar op elke handgreep worden bediend	✗	✓	✗	✓
Instelbare handgrepen (Hoek en lengte)	✗	✓	✗	✓
Parkeerremmen op alle wielen (voetremmen)	✓	✓	✓	✓
Instelbare steunen voor de onderarmen	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde richtingsvergrendeling op de achterwielen (activeren en loslaten met voetpedaal)	✗	✓	✗	✓
Positiesymbolen op de knop voor hoogteinstelling op de handgreep -      0      = OMLAAG    GEEN ACTIE    OMHOOG	✗	✗	✓	✓
Elektrische hoogteinstelling	✗	✗	✓	✓
Hydraulische hoogteinstelling	✓	✓	✗	✗
Kan worden gebruikt onder de douche	✓	✓	✗	✗
Kan dienen als steun tijdens opstaan door de gemakkelijke bediening van de handgreep (Belangrijk: is niet bedoeld om patiënten op te tillen)	✗	✗	✗	✓



H Basic



H Premium



E Basic



E Premium

## Accessoires vor Taurus




**Zijsteun onderarm (paar)**

Art. nr. 814647




**Multifunctionele netje**  
extra ruimte om kleine artikelen gemakkelijk op te bergen (max. 2 kg)

Art. nr. 814821

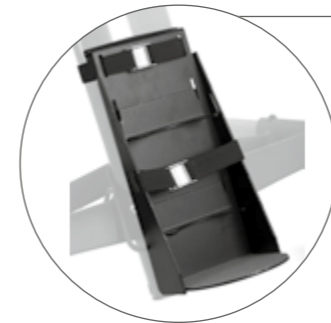

**Zuurstoffleshouder**

Art. nr. 814820

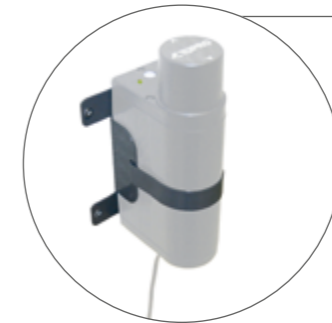

**Wandbevestiging voor accu oplader**

Art. nr. 814085



**Eenhands rem**  
kan aan beide zijden gemonteerd worden voor eenhandige bediening, bijv. na een hersenbloeding.

Art. nr. 814026



**Infuushouder**

Art. nr. 814793



**Voetplaat**  
voor ondersteuning om de gebruiker te vervoeren als deze uitgeput raakt

Art. nr. 814645



**Dienblad**  
om eten en drinken veilig te vervoeren

Art. nr. 814810



**Beugel voor lichaamsvloeistofzakken**

Art. nr. 814034



**Bediening voor hoogtafstelling**  
voor TOPRO Taurus E

Art. nr. 814646



Ondersteund door de TOPRO Taurus kan de gebruiker met of zonder hulp probleemloos opstaan uit bed of uit een stoel.

Accessoires zijn ook te vinden op onze website.



Meer leren  
Accessoires Taurus

Accessoires zijn ook te vinden op onze website.

# TROJA WALKER<sup>2</sup>

DE ONDERARM WALKER MET ROLLATOR COMFORT




De TOPRO Troja Walker2 in zijn opgewaardeerde design is een stabiele walker die even comfortabel is als een rollator. De onderarmsteunen bieden steun bij rechtop lopen en garanderen een juiste loophouding. Praktisch en licht.

- Rij- en parkeerremmen zitten op dezelfde hendel, voor meer gebruiksgemak.
- De handgrepen kunnen omlaag in de zijstangen worden gedruwd, wat handig is voor het opbergen.
- Innovatieve technologie voor zijwaarts **inklappen**, gemakkelijk te bedienen met één hand door te trekken aan het koord op de zetel. Maakt de walker **praktisch om te vervoeren** en zorgt dat die **stevig op zijn wielen blijft staan** en weinig bergruimte inneemt.
- Door de unieke **geheugenfunctie** blijft de vooraf ingestelde ondersteuning voor de onderarmen op de juiste hoogte zitten, wat het gebruiksgemak vergroot.

- **Kogellagers in de vorken en wielen** voor comfortabel rijden en manoeuvreren.
- **Anti stootrand en dempelhulp functie** om veilig en gemakkelijk te manoeuvreren over drempels.
- **Handig netje** voor gemakkelijke toegang tot artikelen. Maximaal 5 kg.
- Nummering voor eenvoudigere hoogte-aanpassing van de handgrepen. Met verbeterde bevestigingsclip.
- Verkrijgbaar in drie verschillende maten.

Afmetingen, kleuren en andere productgegevens vindt u op pagina 14.

Model M, S en X verkrijgbaar in:

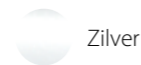

Meer leren  
TOPRO Troja Walker<sup>2</sup>



made in Norway



# TROJA NEURO

DE SPECIALIST



De TOPRO Troja Neuro met omgekeerd remsysteem is speciaal ontwikkeld om gebruikers extra veiligheid te bieden met weglolcontrole. De remmen zijn automatisch geactiveerd tot de remhendels worden ingeknepen.

- Gebaseerd op de beproefde en geteste TOPRO Troja Classic rollator en **voorzien van een omgekeerd remsysteem (RBS)**.
- **RBS** stopt de rollator automatisch, zonder dat in de remhendels hoeft te worden geknepen.
- **Kan niet per ongeluk weggrollen**, maar moet actief worden 'gestart' om in beweging te komen. De **remhendels moeten ingeknepen worden gehouden** om de rollator te verplaatsen.
- **RBS kan de coördinatie gemakkelijker maken** voor mensen met neurologische aandoeningen of leeftijdsgerelateerde veranderingen in de loopvaardigheid. Verder vergroot RBS de veiligheid en zorgt het voor meer stabiliteit bij het zitten op de rollator.
- **Intuïtieve bediening van de remmen**, die gewoonlijk zelfs door mensen met geheugenproblemen snel worden geaccepteerd, wat het risico op vallen vermindert.

- Veiliger zitten en opstaan met de **automatisch ingeschakelde remmen**.
- **Mogelijkheid om de remmen volledig te deactiveren** door de remhendels volledig omlaag te duwen naar de vergrendelde stand. De rollator kan vervolgens vrij bewegen.
- **Ergonomische handgrepen** met flexibele grip, voor een juiste loophouding en comfortabele armsteun (**TOPRO Ergo Grip**). Verandering van grip zorgt voor verlichting van de handen.
- Door de unieke **geheugenfunctie** blijft de vooraf ingestelde handgreep op de juiste hoogte zitten, wat het gebruiksgemak vergroot.
- **Door de kleine draaicirkel** kan de rollator gemakkelijk worden gebruikt in kleine ruimtes (zoals de badkamer of keuken).
- **Anti stootrand en dempelhulp functie** om veilig en gemakkelijk te manoeuvreren over drempels en stoepanden.
- Afneembare, ruime mand.
- **Gemakkelijk inklapbaar** door aan het koord op de zitting te trekken. Blijft stevig op de wielen staan en neemt weinig ruimte in bij opbergen en vervoer.

Afmetingen, kleuren en andere productgegevens vindt u op pagina 15.



Meer leren  
TOPRO Troja Neuro

## Rolweerstandsysteem (RWS)

De TOPRO Troja Neuro kan optioneel worden uitgerust met ons speciale TOPRO Rolweerstandsysteem (RWS).

Dit wordt boven of onder de anti stootrand op het wiel aangebracht en is met de kleine draaischijf onbeperkt instelbaar. Hiermee kan de weerstand van de rollator onbeperkt worden aangepast aan de individuele behoeften van de gebruiker – zodat de gebruiker altijd de optimale weerstand voelt om veilig en gelijkmatig te kunnen lopen.



Rolweerstandsysteem (RWS) dat onder de anti stootrand is aangebracht.



De anti stootrand en het omgekeerde remsysteem (RBS) maken het dagelijks leven eenvoudiger. Permanente geactiveerde rem: inknippen om te lopen, loslaten om te stoppen.



**Rolweerstandsysteem (RWS)** voor Troja Neuro. Om de rolweerstand tijdens het lopen met de rollator aan te passen.  
Art. nr. 814038

## Accessoires voor Troja Walker<sup>2</sup> en Troja Neuro



**Stokhouder**  
Kan aan beide zijden worden aangebracht

**Troja Neuro Art. nr. 814025**  
**Troja Walker<sup>2</sup> Art. nr. 815358**

Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro



**Antislipmatje**  
om uw kopjes, borden enz. veilig te vervoeren op het dienblad

**Art. nr. 814059**

Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro



**Eenhands rem**  
kan aan beide zijden gemonteerd worden voor eenhandige bediening van beide remmen.

**Art. nr. 814026**


Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro



**Duwhandgreep**  
voor begeleider

**Art. nr. 814014**


Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro

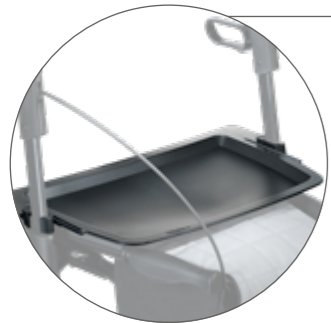

**Dienblad**  
klikt veilig vast, gemakkelijk te verwijderen en reinigen, capaciteit 5 kg

**Art. nr. 814728**

Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro

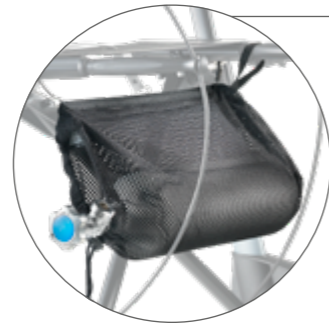

**Zuurstoffleshouder**  
geschikt voor flessen met 2 liter zuurstof (alleen samengeperst, niet vloeibaar). Maximaal 5 kg.

**Art. nr. 814009**

Troja Walker<sup>2</sup>, Troja Neuro



Meer leren  
Accessoires rollators

Extra accessoires zijn te vinden op onze website.

## Technische gegevens voor Taurus

Type	H (hydraulisch)	E (elektrisch)
<b>Aangeraden lengte gebruiker</b>	140-210 cm	140-210 cm
<b>Maximaal gebruikersgewicht</b>	150 kg	150 kg
<b>Hoogte van steunpunten onderarm</b>	86,5-132 cm	86,5-136 cm
<b>Breedte tussen steunpunten onderarm</b>	34-47 cm	34-47 cm
<b>Lengte van onderarmsteunen</b>	34 cm	34 cm
<b>Handgrepen</b>	Rond, Ø 3,5 cm	Rond, Ø 3,5 cm
<b>Draaicirkel</b>	91 cm	91 cm
<b>Diameter wielen</b>	12,5 cm	12,5 cm
<b>Breedte wielen</b>	3,1 cm	3,1 cm
<b>Breedte aan voorzijde, afmetingen binnenzijde</b>	48 cm	48 cm
<b>Breedte aan voorzijde, afmetingen buitenzijde</b>	57 cm	57 cm
<b>Breedte aan achterzijde, afmetingen binnenzijde</b>	57 cm	57 cm
<b>Breedte aan achterzijde, afmetingen buitenzijde</b>	66 cm	66 cm
<b>Gewicht van product</b>	18 kg	22 kg
<b>Gebruiksgebied</b>	Binnen	Binnen

Model	Art. nr.
<b>TOPRO Taurus H Basic</b> (130 N hydraulische veer)	814785
<b>TOPRO Taurus H Premium</b> (130 N hydraulische veer). Incl. instelbare handgrepen, rij- en parkeerrem op de handgrepen, vergrendeling voor zwenkgedeelte.	814787
<b>TOPRO Taurus E Basic</b> (elektrisch)	814790
<b>TOPRO Taurus E Premium</b> (elektrisch). Incl. instelbare handgrepen, rij- en parkeerrem op de handgrepen, vergrendeling voor zwenkgedeelte.	814789


2 jaar garantie, exclusief montage en slijtage van onderdelen.

## Technische gegevens voor Troja Walker<sup>2</sup>



Maat	M (medium)	S (small)	X (extra small)
<b>Aangeraden lengte gebruiker</b>	150-185 cm	130-170 cm	130-160 cm
<b>Maximaal gebruikersgewicht</b>	135 kg	125 kg	80 kg
<b>Maximaal laadvermogen netje</b>	5 kg / 20 l	5 kg / 20 l	5 kg / 11 l
<b>Hoogte van steunpunten onderarm</b>	98-115 cm	84-100 cm	84-96 cm
<b>Handgrepen</b>	Rond, Ø 3,5 cm	Rond, Ø 3,5 cm	Rond, Ø 3,5 cm
<b>Maximale hoogte</b>	65 cm	65 cm	65 cm
<b>Maximale breedte</b>	63 cm	63 cm	53 cm
<b>Zithoogte</b>	63 cm	55 cm	52 cm
<b>Zitbreedte</b>	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
<b>Draaicirkel</b>	84 cm	84 cm	79 cm
<b>Diameter wielen</b>	20 cm	20 cm	20 cm
<b>Breedte wielen</b>	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
<b>Grijpafstand remhendel</b>	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm
<b>Hoogte indien ingeklapt</b>	102 cm	88 cm	88 cm
<b>Breedte indien ingeklapt</b>	33 cm	33 cm	33 cm
<b>Lengte indien ingeklapt</b>	65 cm	65 cm	65 cm
<b>Afmetingen voor vervoer (l x b x h)</b>	65 x 33 x 102 cm	65 x 33 x 88 cm	65 x 33 x 88 cm
<b>Gewicht van product</b>	8,9 kg	8,6 kg	8,3 kg
<b>Gebruiksgebied</b>	Binnen	Binnen	Binnen
<b>Art. nr.</b>	815430	815440	815450

Model M, Sen X  
verkrijgbaar in:

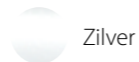


Zilver

## Technische gegevens voor Troja Neuro



Maat	M (medium)	S (small)
<b>Aangeraden lengte gebruiker</b>	150-200 cm	135-170 cm
<b>Maximaal gebruikersgewicht</b>	150 kg	125 kg
<b>Max. laadvermogen netje</b>	10 kg / 16 l	10 kg / 16 l
<b>Hoogte van handgreep</b>	78-100 cm	71-86 cm
<b>Handgrepen</b>	Ergonomisch, verschillende vasthoudstanden (TOPRO Ergo Grip)	
<b>Maximale hoogte</b>	65 cm	65 cm
<b>Maximale breedte</b>	60 cm	60 cm
<b>Breedte tussen handgrepen</b>	47 cm	47 cm
<b>Zithoogte</b>	62 cm	54 cm
<b>Zitbreedte</b>	45,5 cm	45,5 cm
<b>Draaicirkel</b>	84 cm	84 cm
<b>Diameter wielen</b>	20 cm	20 cm
<b>Breedte wielen</b>	3,6 cm	3,6 cm
<b>Grijpafstand remhendel</b>	7 cm	7 cm
<b>Hoogte indien ingeklapt</b>	80 cm	74 cm
<b>Breedte indien ingeklapt</b>	24 cm	24 cm
<b>Lengte indien ingeklapt</b>	65 cm	65 cm
<b>Afmetingen voor vervoer (l x b x h)</b>	65 x 24 x 80 cm	65 x 24 x 74 cm
<b>Gewicht van product</b>	7,8 kg	7,4 kg
<b>Gebruiksgebied</b>	Binnen en buiten	Binnen en buiten
<b>Art. nr.</b>	814746	814747

Model M verkrijgbaar in:

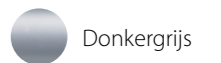

Donkergrijs

Model S verkrijgbaar in:



Zilver



## Premium producten uit Noorwegen

### Fabrikant:



TOPRO Industri AS  
Rambekkevegen 5  
2816 Gjøvik  
Noorwegen

Tel. (+47) 61 13 46 00

E-Mail: [info@topromobility.com](mailto:info@topromobility.com)

Web: [www.topromobility.com](http://www.topromobility.com)

### Gedistribueerd door:



TOPRO Mobility B.V.  
C'Park Bata  
Europaplein 1 Gebouw 21 – unit 2.17  
5684 ZC BEST

Tel: 06 27 288 801

E-Mail: [cs@topromobility.nl](mailto:cs@topromobility.nl)

Web: [www.topromobility.com](http://www.topromobility.com)



Meer leren



[topromobility.com](http://topromobility.com)

Noors ontwerp en geproduceerd in Noorwegen.

TOPRO streeft naar topkwaliteit en biedt een garantie van 7 jaar op de TOPRO Troja modellen en 2 jaar op de TOPRO Taurus modellen (excl. montage en slijtage van onderdelen).

### Normen voor kwaliteitsbewaking

NEN-EN-ISO 9001 – kwaliteit

NEN-EN-ISO 14001 – milieu

NEN-EN-ISO 11199-2 – rollator

NEN-EN-ISO 11199-3 – walker

NEN-EN-ISO 10993-5 – biocompatibiliteit

made in Norway



Voor dealers