


TS506 Low Cell

Dynamisch matrasvervangend anti-decubitus systeem lage cellen

Dynamisch matrasvervangend anti-decubitus systeem dat het bestaande matras vervangt en direct op het bedframe wordt geplaatst. De Micro Low Air Loss cellen dragen bij aan optimale drukverdeling én het verbeteren van het micro klimaat. De schuifkrachten worden opgevangen door de kwalitatief hoogwaardige nylon gecoate luchtcellen.

Met de geruisloze Power Unit stel je gebruiksvriendelijk de wenselijke ligondersteuning in. De alternerende mode heeft 4 cyclus tijden, 5, 10, 15 of 20 minuten. De verzorgingsstand is gebruiksvriendelijk en gaat automatisch na 30 minuten terug naar de therapie instelling. De Power Unit heeft een CPR mogelijkheid voor het snel leeg laten lopen van het matras en de matras is voorzien van een CPR flap.

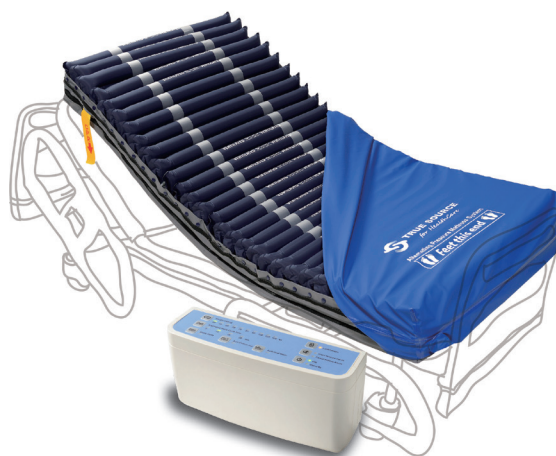

Hoes

- Ademende bi-elastische hoes uit polyester-polyurethaan
- Vochtbestendig, neutraliseert geurtjes, voorkomt schimmelvorming en bacteriegroei

Power Unit

- Lichtgewicht en geruisloos
- Functies kunnen separaat worden geblokkeerd
- Alarm bij wegvallen druk of stroomuitval
- Geheugenfunctie: systeem keert terug naar eerdere stand

Technische gegevens

Matras

Aantal luchtcellen	29, waarvan 26 dynamisch
Grootte luchtcel	10.2 cm
Max belasting	180 kg
Lengte	200 cm
Breedte	85 cm
Hoogte	10 cm
Gewicht	9.5 kg

Technische gegevens

Power Unit

Aantal geproduceerde dB	28
Lengte	26 cm
Breedte	13 cm
Hoogte	8 cm
Gewicht	1.5 kg

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.
Dit product wordt geleverd door Joerns.