


mobility
products

 Gives you power!



www.mobilityproducts.nl

E-WALK

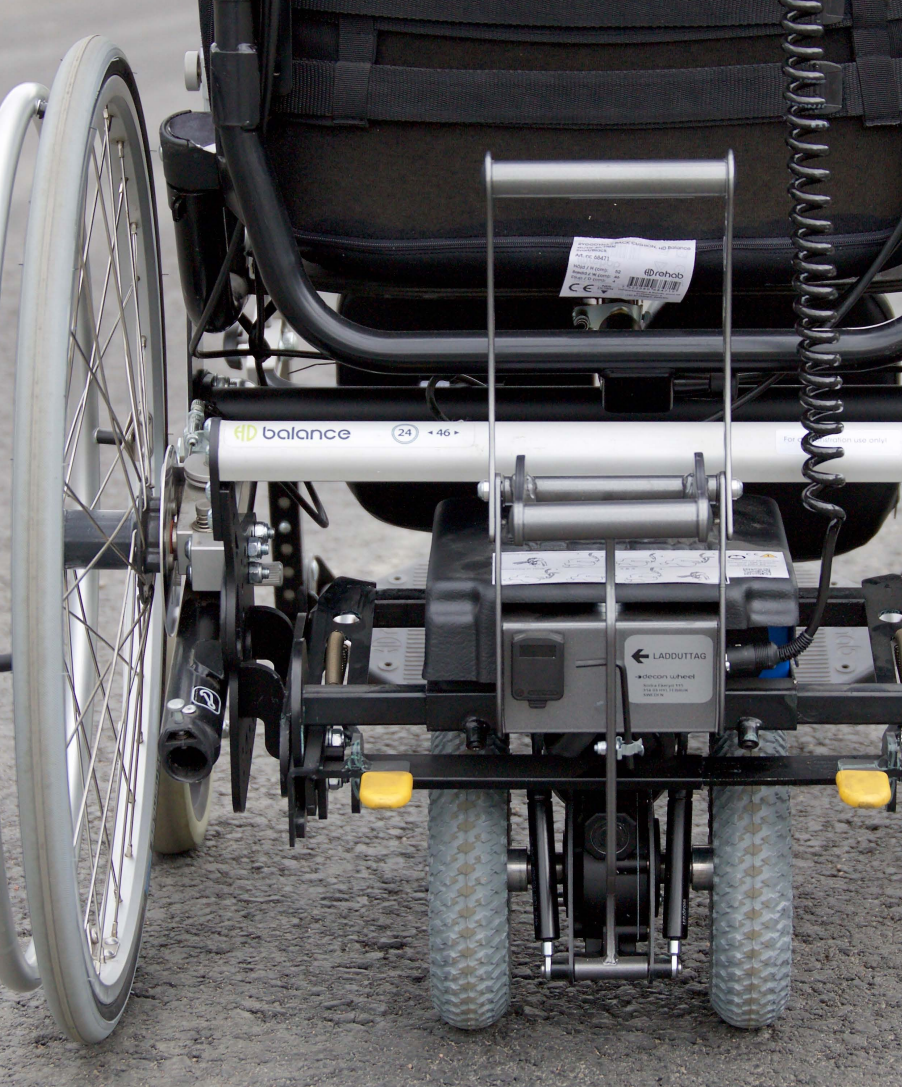

E-Walk Duw en rem- hulp

De E-Walk ondersteunt de begeleider bij het duwen en remmen van de rolstoel. De E-Walk wordt gebruikt in situaties waarin de rolstoelgebruiker zichzelf niet kan voortbewegen en de begeleider niet over voldoende lichaamskracht beschikt om een rolstoel voort te duwen.

Dé hulp voor elke rolstoelbegeleider!

De rem- en duwhulp E-Walk maakt het voor de begeleider mogelijk om zonder krachtinspanning een rolstoel voort te bewegen. De enige handelingen van de begeleider van een handbewogen rolstoel zijn gas geven en sturen. Op vlakke wegen en op hellingen neemt de E-Walk het zware werk over. Bij dalende hellingen remt de E-Walk de rolstoel af en begeleidt bij het stoppen van de rolstoel. Voor elke rolstoelgebruiker/begeleider biedt het E-Walk systeem oplossingen.

Belangrijkste kenmerken van de E-Walk:

- Toepasbaar op de meeste handbewogen rolstoelen met een zitbreedte tussen de 38 en 60cm
- De E-Walk is uitgerust met een proportioneel bedienbare knijpendel en kan zowel voor- als achteruit rijden.
- Door gebruik te maken van een Lithium-Polymeer accu is de hoogte van de E-Walk slechts 30cm zodat deze ook op kantelbare en rolstoelen met een zeer laag frame kan worden gemonteerd.



Specificaties

Motor:	24V 200W	Aandrijfwiel:	200x50, massief	Rolstoelbreedte:	38-60cm framebreedte
Accutype:	LiFe Po4 24V15ah, Lood 2x12V	Maximale actieradius:	22 km conform ISO 7176-4	Maximaal gebruikersgewicht:	150 kg
Tilgewicht:	12ah	Acculader:	100-240 VAC, 50/60Hz	CE marking:	Conform EU 93/42/EEC
	15,4 kg	Laadtijd:	LiFePo4 3 uur, Loodaccu 5-6 uur	Garantie:	2 jaar

mobility products *Gives you power!*

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden | Tel.: +31(0) 85 87 86 144 | info@mobilityproducts.nl | www.mobilityproducts.nl