

# Q300 M Mini Teens

De compacte elektrische rolstoel  
die meegroeit.



# EEN ZEER COMPACTE ROLSTOEL VOOR TIENERS IN DE GROEI.

Het is een feit, tieners groeien en snel ook. Sneller dan dat je lief is groeien ze uit hun kleren en hun elektrische rolstoel. Daarom hebben we de Q300 M Mini Teens ontwikkeld - een elektrische rolstoel om groeiende tieners bij te houden!

Door het verstelbare zitsysteem dat zowel in lengte als in breedte groeit, betekent ouder worden niet langer een grote aanpassing aan een nieuwe rolstoel. De Q300 M Mini Teens past bij de meeste kinderen op 18-jarige nog net zo goed als op 13-jarige leeftijd!

Het zou natuurlijk geen mini zijn zonder een ongelooflijk smalle, super wendbare basis van 520 mm breed. Daardoor navigeer je eenvoudig door krappe situaties. Naar school, de bioscoop of met vrienden naar het park gaan, het kan allemaal door de uitstekende buitenprestaties van de Q300 M Mini Teens. Zelfredzaamheid betekent onafhankelijkheid!

Bovendien stelt C-Me je in staat om stapvoets met de zitting omhoog te rijden. Zo kun je je op ooghoogte met je vrienden praten en tegelijkertijd rijden.



Scan de QR code met de camera van je smartphone om de video te bekijken.





De Q300 M Mini Teens is zo compact dat krappe ruimtes geen probleem meer zijn!



# 520 MM BREED



### WAT IS MIDWIELAANDRIJVING?

Daarbij zitten de aandrijfwielen van een elektrische rolstoel in het midden. Zijn ze meer naar voor of achter gepositioneerd, dan is de draaicirkel groter (en zwenkt de rolstoel meer uit). Ook is er minder gewicht op de aandrijfwielen, dus minder tractie. Omdat de Q300 M Mini Teens een ECHTE midwieler is, combineert die een super compacte draaicirkel met optimale tractie en stabiliteit.



**1120 mm**  
KLEINE DRAAICIRKEL

# KRAPPE RUIMTES? HALLO MIDWIEL- AANDRIJVING!

Van rommelige klaslokalen tot drukke gangen, de Q300 M Mini Teens kan het makkelijk aan. Nooit meer omrijden!



## 410 mm

### ZITHOOGTE

We hebben de Q300 M Mini Teens zo ontwikkeld dat deze een zeer lage zithoogte heeft. Daardoor kunnen we een zithoogte van **410 mm** halen met een vaste kantelinstelling en **430 mm** met een elektrische kantelverstelling. Ideaal om onder een bureau of tafel te rijden.



### BEDIENING

Zit de bediening niet in de juiste positie? Deze (optionele) montageoptie heeft 3 vergrendelingsposities - **naar buiten** (om dichterbij tafels te komen), **naar binnen** (als de handmobiliteit beperkt is) en de **standaard** rijpositie.

## 1120 mm LENGTE

Met een lengte van slechts 1120 mm rijdt de Q300 M Mini Teens met gemak in en uit een kleine lift en andere krappe ruimtes. En door zijn lichte gewicht (vanaf 103 kg) is deze rolstoel geschikt voor vrijwel elke rolstoellift.

### KOM DICHTERBIJ MET EEN CENTRALE BEENSTEUN

Met een centrale beensteun in plaats van standaard beensteunen kan je dichterbij objecten komen, onder tafels rijden en heeft de Q300 M Mini Teens een zeer kleine draaicirkel.




# GROTE PRESTATIES, KLEINE ROLSTOEL.

Geniet van de Q300 M Mini Teens,  
dè compacte elektrische rolstoel met  
GROOTSE buitenprestaties.  
Ga erop uit!

## 70 mm

### STOEPENKLIMMER

Stoepranden tot 70 mm zijn voor de  
Q300 M Mini Teens met 14"  
aandrijfwielen geen probleem.  
Dus omrijden is niet nodig.

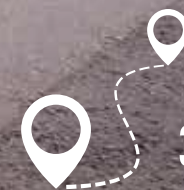

## 36 km

BEREIK

Op pad gaan zonder je druk te maken  
over de accucapaciteit.

### KRIJG GRIP MET MEER TRACTIE

De 14" aandrijfwielen zorgen ervoor dat de rolstoel een goede grip heeft met meer tractie en stabiliteit, op elke ondergrond!

### ANTI-PITCH TECHNOLOGIE

De anti-pitch technologie zorgt ervoor dat het onderstel tijdens het afremmen niet te ver voorover helt zodat je veilig en stabiel in de rolstoel blijft zitten.

### KRACHTIGE 4-POLIGE MOTOREN

De krachtige en betrouwbare 4-polige motoren met hoge koppeling zorgen voor snelheden van 6 en 10 km/u. Ontdek de wereld!



### UNIEK INSTELBAAR VEERSYSTEEM

Het unieke instelbare veersysteem werkt op alle wielen. Wanneer je over obstakels rijdt houden alle 6 wielen, onafhankelijk van elkaar, contact met de ondergrond. Verder vangt het veersysteem ook schokken en trillingen op dat voor comfortabel en veilig rijgedrag zorgt.

# EEN ZITSTEEEM DAT MEEGROEIT.

Opgroeien betekent niet direct uit een elektrische rolstoel groeien. De Q300 M Mini Teens is voorzien van een meegroeibaar zitsysteem. Verstelbaar in breedte (280-400 mm) en in diepte (360-500 mm). Ideaal voor tieners met een smalle zitbreedte maar die in de loop van de tijd wel een grotere zitdiepte nodig hebben.



**UNIVERSELE HOOFDSTEUN**  
Een hoofdsteun stabiliseert het hoofd en laat het hoofd rusten. De universele hoofdsteunbevestiging kan gecombineerd worden met zowel **SEDEO** als **WHITMYER** hoofdsteunen en helpt bij verschillende hoofdondersteuningsbehoeften (van standaard tot meerpuntsbediening).

## HOOG GEMONTEERDE VOETPLATEN

De voetplaten zijn traploos in hoek en in positie instelbaar (voor een ideale positionering van de voeten, enkels en knieën). Deze voetplaten zijn verstelbaar tussen **180 mm** boven het zitvlak en **480 mm** eronder.





## SEDEO PRO DIEP CONTOUR RUGLEUNING

De diepe zijwangen zijn in de rugleuning geïntegreerd en speciaal gevormd voor meer comfort en laterale ondersteuning. Ideaal als je veel zijwaartse stabiliteit nodig hebt maar ook voldoende bewegingsvrijheid voor de schouderbladen. Ook na verloop van tijd blijven ze op de juiste plaats zitten.



### ZIJN ER SPECIFIEKE KLINISCHE ZITWENSEN?

De Q300 M Mini Teens kan gecombineerd worden met een Jay® J3 rugleuning. Geschikt voor gemiddelde tot hoge positionering. De Jay® J3 rugleuning biedt meerdere ondersteuningsniveaus en maatvoeringen aan om de rugleuning nauwkeurig op je bouw en behoeften af te stemmen.

# EXTRA POWER!

---

De Q300 M Mini Teens levert niet alleen GROTE prestaties, maar ook de functionaliteiten van een 'GROTE' elektrische rolstoel! Een elektrische kantelverstelling, rughoekverstelling of hoog/laagverstelling: de Q300 M Mini Teens zit bomvol opties die passen bij je klinische behoefte en levensstijl.



30°

## KANTELVERSTELLING

Met de mechanische of elektrische kantelverstelling (optioneel) kun je je zitpositie gedurende de dag zelf aanpassen. Door het veranderen van je zitpositie verplaatst je je gewicht van het zitkussen naar de rugleuning - dit zonder spierinspanning en behoudt van een comfortabele zitpositie.



### VR2 OF R-NET BEDIENING

De Q300 M Mini Teens wordt geleverd met een betrouwbare, intuïtieve VR2 bediening. Is meer technologie wenselijk? Kies dan voor de geavanceerde R-net bediening (optioneel). Met een groot, goed leesbaar HD-scherm en makkelijk te bedienen knoppen waarmee je niet alleen contact houdt met je rolstoel, maar ook met je telefoon, Ipad en omgeving.

### ELEKTRISCHE LENGTE-COMPENSERENDE BEENSTEUN(EN)

Het omhoog en omlaag bewegen van de benen d.m.v. elektrische lengtecompenserende beensteunen ondersteunt de bloedsomloop en ondersteunt het verminderen van zwellingen. Door de lengtecompensatie blijft de juiste zitpositie behouden om ongewenste bewegingen in de bekken te voorkomen.

### HOOG/LAAG VERSTELLING

Alle dingen binnen handbereik door de hoog/laag verstelling van **300 mm**. Meer onafhankelijk en dus meer vrijheid. Ook kan de hoog/laag verstelling jou of je verzorgers ondersteunen bij een transfer.





## RIJDEN OP OOGHOOGTE MET C-ME

Op ooghoogte meerijden en kletsen met je vrienden, zonder te stoppen. Dat kan met C-Me. Met deze functie kan je tot 300 mm verhogen en tegelijkertijd tot 4,8 km/u rijden. Erbij horen, gewoon tiener zijn!



### VERHOOGD COMFORT BIJ VERHOOGD RIJDEN

In tegenstelling tot andere elektrische rolstoelen, blokkeert onze vering niet bij het gebruik van C-Me. Ook niet wanneer de ondergrond hobbelig is. Bovendien zorgt de anti-pitch technologie voor extra veiligheid en stabiliteit op hellingen.





### **STOPSCHAKELAAR VOOR MEER VEILIGHEID**

Met de toegevoegde stopschakelaar kan een begeleider de Q300 M Mini Teens op elk moment en tot op 30 meter afstand stoppen. De afstand is afhankelijk van de omgeving. Veiligheid voorop!




### **TOEWIJSBARE KNOPPEN**

Met de gepatenteerde toewijsbare-knoppen-technologie van QUICKIE® verander je de functie van elke knop/schakelaar op de bedieningskast. Ook kun je een tweede (lang indrukken) functie toewijzen aan een knop/schakelaar. Zo heeft je tiener snel en makkelijk toegang tot de functies die hij/zij veel gebruikt – zonder de joystick te gebruiken. Altijd handig!



# LEKKER KLEURRIJK.

12 kleurrijke bekappingen te combineren met 7 mooie accentkleuren voor de wielen en de zwenkwielen.

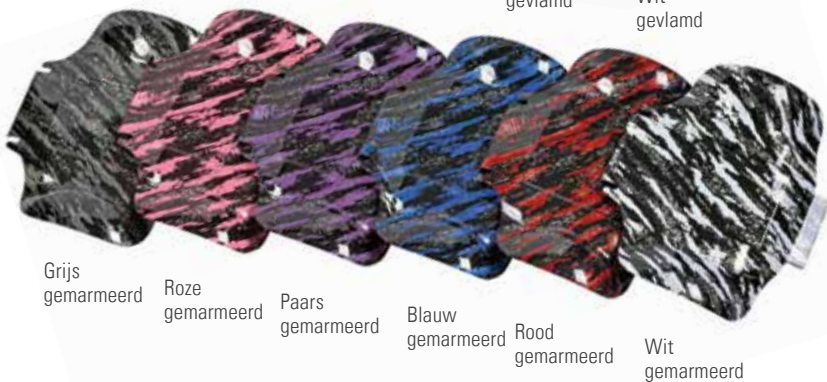

**BEKAPPING:** Rood Blauw Wit Zwart

**ACCENT:** Groen Oranje Blauw Rood Zilver Wit Zwart





### **PERSOONLIJKE BEKAPPING**

Heb je specifieke wensen over hoe je rolstoel eruit moet zien? Laat het ons weten. Het Built-4-Me team kan bijna elk bekappingsontwerp creëren.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Zitbreedte	280 - 400 mm
Zitdiepte	360 - 500 mm
Zithoogte	410 - 470 mm
Rughoogte	385 - 510 mm
Onderbeenlengte	180 - 510 mm
Elektrische kantelverstelling	0 - 50° / 0 - 30° / -5 - 25°
Totale breedte	Vanaf 520 mm
Totale lengte (met centrale beensteun)	1060 mm
Draaicirkel	1120 mm
Max. hellingshoek	6°
Max. obstakelhoogte	50 mm (met 12" aandrijfwielen) 70 mm met 14" aandrijfwielen)
Max. actieradius (ISO 7176-4)	Tot 25 km (met 41 Ah accu's) Tot 36 km (met 56 Ah accu's)
Rolstoelgewicht (zonder accu's)	Vanaf 103 kg
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Aandrijfwielen	12" / 14"
Max. snelheid	6 km/u of 10 km/u
Accu's	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Bediening	VR2, R-NET
Gecrashtest	Ja, succesvol volgens ISO 7176-19
Bedoeld gebruik en gebruiksomgeving	Voor tieners/ jongvolwassenen met een mobiliteitsbeperking, binnen- en buitengebruik. Rolstoeltype klasse B.



Scan de QR code met de camera van je smartphone om de video te bekijken.

Ga naar je dealer voor meer informatie of een testrit.



[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)