

Maxi Move®



De Maxi Move is ontworpen om één zorgverlener in staat te stellen om dagelijkse transfers en herpositionering van zorgvragers uit te voeren. Het is een veelzijdige oplossing die met behulp van diverse tiljukken kan worden aangepast om een oplossing te creëren die is afgestemd op de specifieke transferbehoeften van de zorgvrager.

DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.

E. Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), en kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Stabiel tillen**
Stabiele verticale tilbeweging houdt de zorgvrager op een constante afstand van de mast en in een stabiele positie tijdens tilhandelingen en transfers.
- **Precisietransfers**
In het tiljuk is een elektrisch kanteljuk geïntegreerd dat helpt om de zorgvrager in de tilband te herpositioneren, waardoor handmatige transfers worden beperkt.
- **Veelzijdigheid**
Optionele verwisselbare tiljukken bieden zorgverleners een flexibel systeem dat hen eveneens in staat stelt om te kiezen uit een uitgebreid assortiment tilbanden.
- **Breed tilbereik**
De dubbelwerkende telescopische mast, die kan worden gecombineerd met een extra lange tilarm, biedt een breed tilbereik voor transfers naar bed en vanaf de vloer.
- **Flexibel systeem met diverse beschikbare opties**
Er is een optionele weegunit leverbaar, evenals zwenkwielen in drie maten, waaronder extra lage zwenkwielen die makkelijk onder lage banken en wagens kunnen worden geschoven.

Belangrijkste kenmerken

COMBI-HULPSTUK

Het Combi-hulpstuk garandeert een soepele en eenvoudige verwisseling van verschillende tiljukken en stretcherframes.

ELEKTRISCH KANTELJUK

Het elektrische kanteljuk beperkt handmatige transfers tot een minimum en verbetert de nauwkeurigheid bij het positioneren van de zorgvrager.

ZWENKWIELMAAT

De zwenkwieken zijn leverbaar in drie maten: standaard, laag en extra laag voor een goede toegang onder lage bedden en wagens.



DUBBELE BEDIENING

Dubbele bedieningsknoppen op de mast en de afstandsbediening. Dankzij het gebruik van de afstandsbediening heeft de zorgverlener meer bewegingsvrijheid en kan hij/zij dichterbij de zorgvrager blijven en tijdens het til- en transferproces oogcontact houden.

WEEGUNIT (OPTIONEEL)

Optionele geïntegreerde weegunit ondersteunt een efficiënte weegroutine.

TELESCOPISCHE VERTICALE MAST

De verticale mast zorgt voor stabiliteit wanneer de zorgvrager wordt getild.


PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	227 kg
Max. veilige tilbelasting wanneer uitgerust met verlengde tilarm	130 kg
Gewicht tillift (met tiljuk en batterij)	70 kg
Maximale tilhoogte	1.575 mm
Minimale tilhoogte	225 mm
Bereik bij tillen	1.350 mm
Min. hoogte bij opslag	1.402 mm
Breedte onderstel bij gesloten poten	718 mm
Breedte onderstel bij open poten	1.196 mm
Breedte poten gesloten	578 mm
Breedte poten open	1.074 mm
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)	115 mm (std. zwenkwiel) 101 mm (laag) 57 mm (extra laag)
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	25 mm (std. en laag zwenkwiel) 19 mm (extra laag)
Lengte tillift	1.118 mm
Draaicirkel	1.222 mm
Beschermingsklasse tillift	IPX4
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7
Batterij	24 V, 4 Ah
Batterijlaadindicator	
Service-indicator - geeft de totale gebruikstijd (uren) aan	
Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval	
Automatische uitschakeling indien de lift bij het omlaag brengen een obstakel raakt	
Zwenkwieken met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem	

ACCESSOIRES

- Groot assortiment tiljukken
- Breed scala aan tilbanden en Flites (wegwerptilbanden)
- Stretchersystemen
- Optioneel: verlengde tilarm, weegunit, zwenkwieken voor lage hoogte
- Arjo-desinfectiemiddelen

BENODIGDE RUIMTE

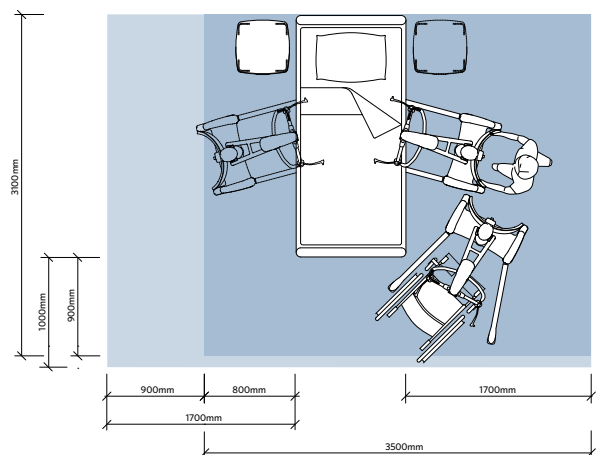

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de verrijdbare tillift te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de verrijdbare tillift en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.