

Walker®



De Walker biedt ondersteuning voor het zetten van die eerste stap – voor zowel de zorgvrager als de fysiotherapeut.

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



B © Arjo 2019

B. Tot op zekere hoogte ambulant, loopt soms met een rollator/krukken.
Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **De eerste stap**
Een oefenhulpmiddel voor in de sportzaal, behandelruimte of zorginstelling dat de beste omstandigheden creëert voor het zetten van die eerste stap.
- **Hoog-laagfunctie**
De hoog-laagfunctie beperkt de risico's tijdens transfers voor zowel zorgvrager als fysiotherapeut wanneer de zorgvrager omhoog/omlaag wordt geholpen om te gaan staan/zitten.
- **Functies voor veiligheid en comfort**
Verstelbare handgrepen bieden de zorgvrager een stevig houvast, de U-vormige tafel biedt steun en de rugsteun-/veiligheidsriemen voorkomen vallen.
- **Rechtuit rijden en remmen**
De voorziening voor rechtuit rijden helpt de zorgvrager om recht naar voren te lopen. De Walker heeft remmen op twee zwenkwielen.
- **Vrije toegang**
Door de open zijkanten van de Walker heeft de fysiotherapeut vrije toegang tot de heupen, knieën en enkels van de zorgvrager om de zorgvrager te helpen bij de looptraining.

Belangrijkste kenmerken

STEUNTAFEL

De U-vormige steuntafel is zacht en stabiel om op te leunen.

ZITSPATEL

Zodra de zorgvrager rechtop staat, kan de zitspatel eenvoudig worden verwijderd.

HANDGREPEN

Verstelbare handgrepen bieden de zorgvrager een stevig houvast.

AFSTANDSBEDIENING

De Walker heeft een afstandsbediening, zodat de fysiotherapeut dicht bij de zorgvrager kan blijven.

RECHTUIT RIJDEN


Voorziening voor rechthoudend rijden helpt de zorgvrager om in een rechte lijn te lopen en vereenvoudigt het transport in de gangen.



PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	136 kg
Gewicht tillift (incl. batterij)	53 kg
Min. hoogte bij opslag	1.165 mm
Breedte onderstel bij gesloten poten	843 mm
Breedte poten gesloten	694 mm
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)	165 mm
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	117 mm
Totale lengte van de tillift	1.040 mm
Draaicirkel	1.320 mm
Beschermingsklasse tillift	IPX4
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7
Batterij	24 V, 4 Ah
Noodstop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval	
Automatische veiligheidsuitschakeling als de tillift bij het omlaag brengen een obstakel raakt (bij elektrische versie)	
Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem	

BENODIGDE RUIMTE

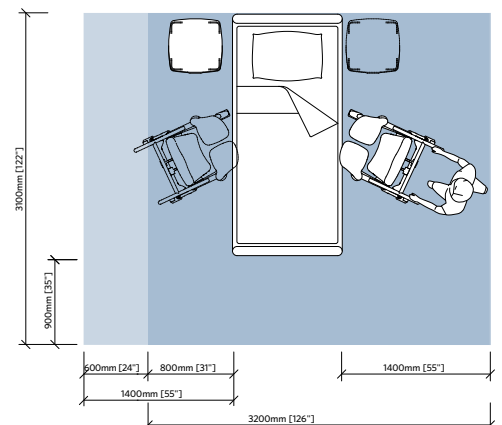

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met het hulpmiddel en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.