



Ontworpen
om dagelijkse
transfers
eenvoudiger
te maken

ACTIEVE TILLIFT

Sara[®] Flex - details die het verschil kunnen maken

arjo

Verzorgen is aandacht voor details

Bij Arjo heeft 65 jaar ervaring ons geleerd dat alles draait om details.

Details betekenen het verschil tussen comfort en pijn, een rustige of een angstige zorgvrager, een zorgverlener die efficiënt kan werken of een zorgverlener die constant achter de feiten aanloopt. Wanneer een zorgvrager vanuit een zittende naar een staande positie wordt geholpen, maken details het verschil.

De Sara® Flex van Arjo is ontworpen om dagelijkse transfer- en zorgtaken te vergemakkelijken en maakt het een zorgverlener mogelijk om een zorgvrager vanuit een zittende positie naar een veilige, stevige en comfortabele staande positie te helpen, in één ergonomische beweging.

Het zijn de details die van elke volgende transfer een positieve ervaring maken, of het nu gaat om transfer naar een rolstoel, het toilet, een douchestoel of vroege mobilisatie na een operatie.



Mobiliteitspectrum van Carl

De SARA FLEX is speciaal ontworpen voor zorgvragers en bewoners die zich niet zonder hulp kunnen mobiliseren, maar die wel aan de actie kunnen bijdragen of een gedeelte van de actie onafhankelijk kunnen uitvoeren. Neem contact op met Arjo voor meer informatie in verband met de Mobiliteitswijzer™



STEDS VANUIT EEN GEOPTIMALISEERDE POSITIE.
VANUIT EEN VEILIGE POSITIE VAN ZITTEND NAAR STAAND

Essentiële
dagelijkse
transfer- en
zorgtaken
mogelijk
maken.



Geoptimaliseerde ondersteuning voor de zorgvrager


Bevordert comfort en zekerheid gedurende het gehele bewegingsproces van zittend naar staand

Eenvoudig in gebruik met verbeterde wendbaarheid

Biedt verbeterde wendbaarheid en vereist geen aanpassing, verzekert gebruiksgemak

Geschikt voor veel zorgvragers

Transfertaken van zittend naar staand kunnen door één zorgverlener uitgevoerd worden bij een groot aantal verschillende zorgvragers in het Carl-mobiliteitspectrum

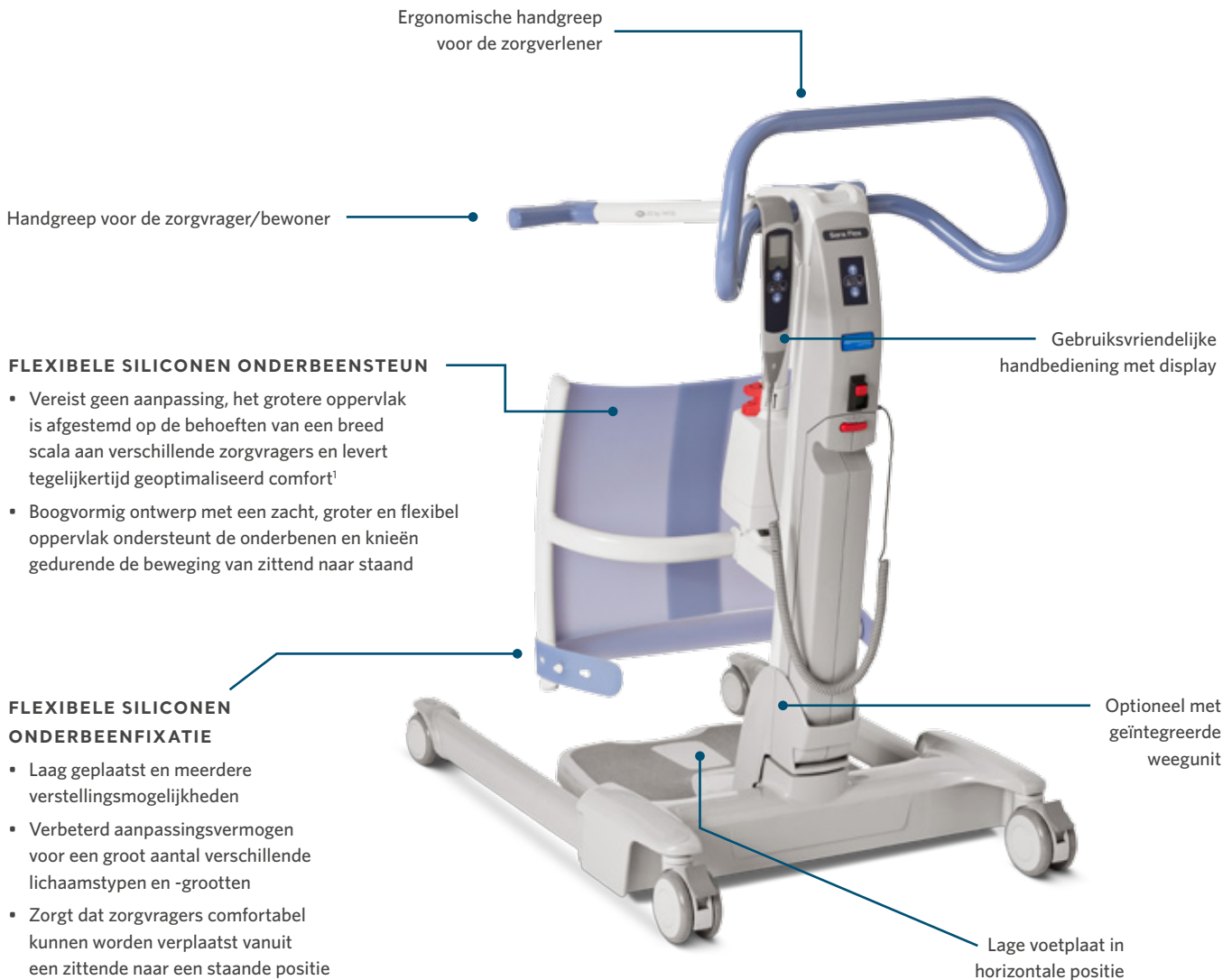

FLEXIBELE SILICONEN ONDERBEENSTEUN

- Vereist geen aanpassing, het grotere oppervlak is afgestemd op de behoeften van een breed scala aan verschillende zorgvragers en levert tegelijkertijd geoptimaliseerd comfort!
- Boogvormig ontwerp met een zacht, groter en flexibel oppervlak ondersteunt de onderbenen en knieën gedurende de beweging van zittend naar staand

FLEXIBELE SILICONEN ONDERBEENFIXATIE

- Laag geplaatst en meerdere verstelmogelijkheden
- Verbeterd aanpassingsvermogen voor een groot aantal verschillende lichaamstypen en -grootten
- Zorgt dat zorgvragers comfortabel kunnen worden verplaatst vanuit een zittende naar een staande positie

Ergonomische voorwaartse beweging

- De voorwaartse beweging maakt in combinatie met de flexibele onderbeensteun een ergonomische en comfortabele beweging van zittend naar staand mogelijk!

Klein en licht

- Zorgt voor een optimaal formaat van de Sara Flex dat niet dreigend is en het beste past bij de behoeften van zorgvragers die anders angstig kunnen raken door grote en hinderlijke hulpmiddelen
- Ontworpen met oog voor esthetiek, zodat kwetsbare zorgvragers rustig blijven tijdens de transfer van zittend naar staand

Lage voetplaat in horizontale positie

- Maakt een ergonomische beweging van zittend naar staand mogelijk, speciaal ontworpen om voor de zorgvrager soepel en natuurlijk over te komen
- Maakt de voetplaatsing eenvoudig en ondersteunt en verbetert tegelijkertijd de beweging van zittend naar staand

Gebruiksvriendelijke handbediening met display

- Maakt een snelle en probleemloze transfer mogelijk, met minimale inspanning
- Zorgt dat zorgverleners dicht bij de zorgvrager kunnen werken en intuïtief het gewicht kunnen aflezen of de lift kunnen manoeuvreren

Handgreep voor de zorgvrager

- De handgreep is in een hoek geplaatst en makkelijk vast te pakken, en zorgt zo voor een comfortabele positionering van handen, polsen en ellebogen tijdens de beweging van zittend naar staand




Handgreep voor de zorgverlener

- Intuïtieve ergonomische efficiëntie dankzij flexibele grip

Ontworpen om dagelijkse transfers eenvoudiger te maken



Productspecificaties

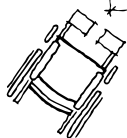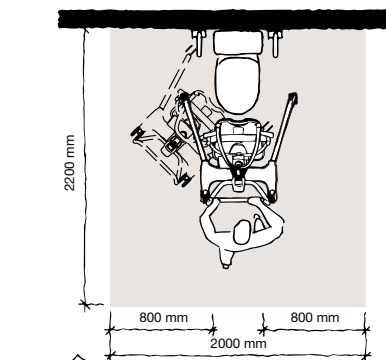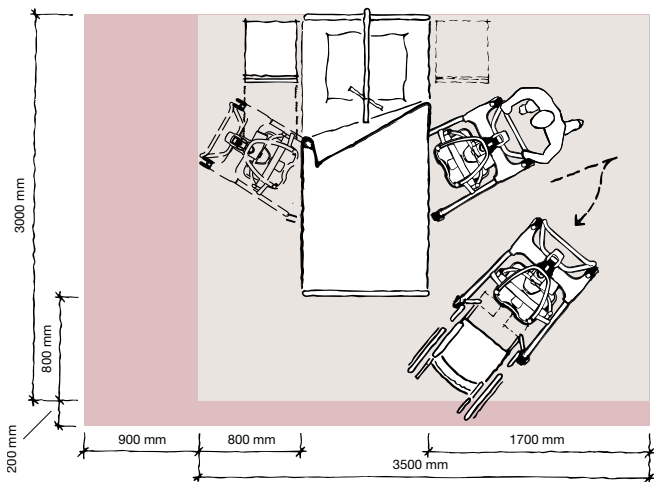

■ Het grijze gebied duidt de minimale werkruimte aan die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één zijde met het mechanische hulpmiddel te werken.

■ Het roze gebied duidt de benodigde extra werkruimte aan om makkelijker aan beide zijden te kunnen werken en voldoende toegang voor de cliënt, het mechanische hulpmiddel en de assisterende zorgverlener te kunnen voorzien.

Productinformatie

Max. veilige tilbelasting	200 kg
Weegcapaciteit	200 kg
Gewicht	52 kg
Gewicht met weegunit	53,6 kg
Totale lengte	996 mm
Minimale tilhoogte	991 mm
Maximale tilhoogte	1518 mm
Totale hoogte	1162 mm
Hoogte van het chassis	100,5 mm
Breedte onderstel bij gesloten poten	660 mm
Breedte onderstel bij open poten	1029 mm
Accu	24 V DC 4Ah
Beschermingsklasse tillift	IP24
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem

Accu-leeg-indicator: geeft restvermogen accu aan en geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden

Service-indicator: geeft de totale gebruikstijd van de motor aan

Noodstop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval

Optie

Geïntegreerde weegunit

Keuringen

EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)

EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Mobiliteitswijzer

Geschikt voor Carl



C Carl, zit in een rolstoel en heeft weinig restcapaciteit om zichzelf te ondersteunen

Neem contact op met Arjo voor meer informatie over de Mobiliteitswijzer™.



Verzorgen
is aandacht
voor details

Referenties: 1. Fray M et al. (2018) An evaluation of sit to stand devices for use in rehabilitation (whitepaper)

Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, Maart 2018.

Bij Arjo geloven we dat de stimulatie van beweging binnen zorgomgevingen essentieel is voor een kwalitatief hoogwaardige zorg. Bij het ontwerp van onze producten en oplossingen (zoals transferhulpmiddelen, medische bedden, hulpmiddelen voor hygiëne, desinfectie, diagnostiek, de preventie van drukletsels en veneuze trombo-embolie) streven we naar een veilige en waardige ervaring. Met meer dan 6500 werknemers wereldwijd en 65 jaar ervaring in de zorg, zetten wij ons dagelijks in voor gezondere resultaten voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • België • +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be

arjo

01.KK.29.2.BE-NL.1.ARJO