



Meer welzijn
en veiligheid
voor zorgvrager
en zorgverlener

ARJO CLASSIC LINE® 2 BADKUIP

In hoogte verstelbaar badsysteem voor baden met hulp

Maakt het baden veiliger en gemakkelijker voor zorgvragers en zorgverleners



Zorgverleners ervaren het verlenen van hygiënische zorg aan zorgvragers vaak als een tijdrovende taak met veel risico op letsel. De Classic Line™ 2 badkuip is in hoogte verstelbaar, waardoor de zorgverlener een betere werkhouding kan aannemen en de kans op fysieke overbelasting afneemt. Omdat de kans op letsel afneemt, kan de zorgverlener de aandacht op de zorg voor en individuele voorkeuren van de zorgvrager richten.



Zorgvragers kunnen bij het baden potentieel ongemak voor, tijdens of na het baden ervaren, en een verlies van waardigheid door de kwetsbaarheid van het proces. De badoplossingen van Arjo stellen de zorgverlener in staat om persoonsgerichte zorg te verlenen en zijn ontworpen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Verbeterde hygiënische zorg voor zorgvragers

Voordelen voor het welzijn

- Onderdompeling van het hele lichaam in warm water (ongeveer 40 graden) kan positieve effecten hebben in verband met de stemming, zoals minder vermoeidheid, stress en spanning-angst.¹

Klinische voordelen van baden in warm water

- Onderdompeling in warm water (37 tot 39 graden) bij het baden is effectief gebleken bij de behandeling van osteoartritis van de knie en zorgt na verloop van tijd voor minder pijn en minder gebruik van pijnstillende medicatie, en voor verbetering van het functioneren.²
- Het op passieve wijze opwarmen van het lichaam in een warm bad (15 sessies van een half uur in een periode van drie weken) heeft een positief effect op het slaappatroon van vrouwen met fibromyalgie.³



Introductie van de Classic Line 2

De Classic Line 2 badkuip van Arjo maakt deel uit van een complete badoplossing die het welzijn van de zorgvrager verbetert en tegelijkertijd de veiligheid van de zorgverlener ondersteunt.

Het baden van een zorgvrager met behulp van een hooglaagbadkuip kan de statische overbelasting van de rug van de zorgverlener met 15% verminderen in vergelijking met een badkuip op vaste hoogte.⁴

Betrouwbaarheid en veiligheid

De Classic Line 2 is uitgerust met meerdere veiligheidsfuncties ten behoeve van een ontspannende en veilige badervaring voor de zorgvrager. Hiertoe behoren een drievoudige beveiliging tegen verbranding, watertemperatuurdial, noodstop en nooddaling, en een bedieningspaneelvergrendeling. Het hygiënische systeem omvat een optioneel geïntegreerd desinfectiesysteem en een automatische waterspoeling, waardoor de zorgvrager nog meer kan worden beschermd.

Meer voordelen voor het welzijn

Het huiselijke ontwerp ondersteunt een comfortabele badervaring. Optionele functies zoals de AirSpa™ kunnen de algehele badervaring nog verder verbeteren doordat ze de zorgvrager een ontspannend en masserend gevoel geven. Dit helpt de bloedcirculatie en het welzijn te bevorderen.

Te gebruiken door één zorgverlener

De Classic Line 2 kan worden gecombineerd met het volledige assortiment tilliften van Arjo. Zodoende kan één zorgverlener een vloeiende badroutine uitvoeren voor zorgvragers met uiteenlopende niveaus van functionele mobiliteit. Dankzij deze in hoogte verstelbare badkuip wordt het risico op statische overbelasting van de rug van de zorgverlener verminderd, waardoor de zorgverlener de aandacht op de zorg voor de zorgvrager kan richten.

Belangrijkste kenmerken

DRIEVOUDIGE BEVEILIGING TEGEN VERBRANDING

Stopt de waterstroom als de temperatuur hoger is dan het veilige niveau.

NOODDALING (OPTIONEEL)


Bij een stroomstoring kan de badkuip omlaag worden gebracht om de zorgvrager veilig uit bad te helpen.

AIRSPA-THERAPIE (OPTIONEEL)

Het AirSpa™-therapie-systeem blaast met variabele intensiteit lucht door tien strategisch geplaatste spuitkanalen. Dit geeft de zorgvrager een ontspannend en masserend gevoel.

Automatische waterspoeling

Elke 24 uur worden de leidingen doorgespoeld met water, waardoor stilstaand water wordt voorkomen en de kans op de ontwikkeling van bacteriën wordt verminderd.

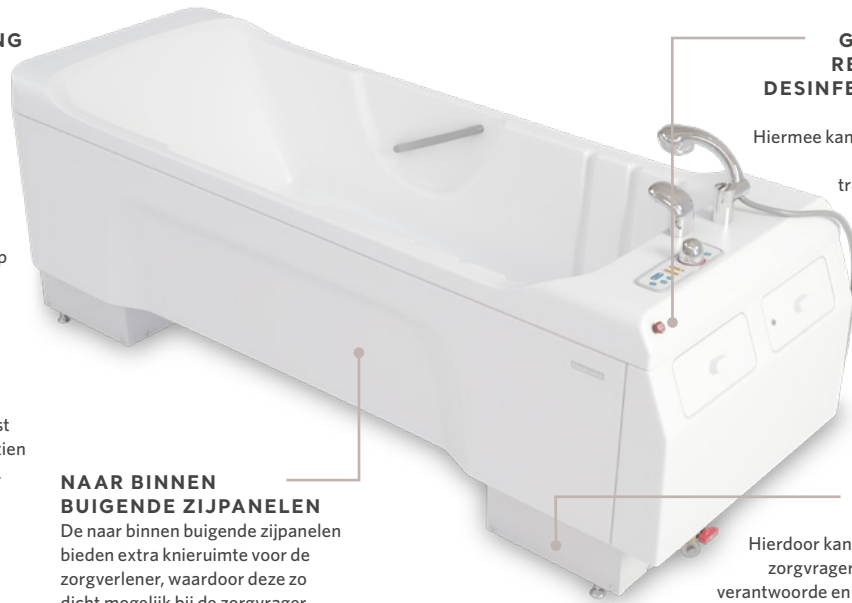

GEÏNTEGREERD REINIGINGS- EN DESINFECTIESYSTEEM (OPTIONEEL)

Hiermee kan de zorgverlener het bad en eventuele transferhulpmiddelen na gebruik reinigen en desinfecteren.

NAAR BINNEN BUIGENDE ZIJPANELEN

De naar binnen buigende zijpanelen bieden extra knieruimte voor de zorgverlener, waardoor deze zo dicht mogelijk bij de zorgvrager kan komen.

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Hierdoor kan één zorgverlener de zorgvrager in een ergonomisch verantwoorde en veilige werkhouding baden.

DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO

In combinatie met een tillift of badlift is de badkuip ontworpen met het oog op Albert, Barbara, Carl, Doris en Emma.



Badoplossingen voor zorgvragers met uiteenlopende niveaus van functionele mobiliteit

Tilliften

Transfer van en naar badlift



Sara® Steady



Sara® Flex



Maxi Sky®

Badliften

Transfer van en naar badkuip



Alenti®



Miranti®

Badkuip



Classic Line 2

1. Goto et al (2014). Physical and mental effects of bathing: A Randomised Intervention Study. Evidence-Based Complimentary and Alternative Medicine. Volume 2018, Article ID 9521086. 2. Branco M, Rêgo NN, Silva PH et al. Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med. 016;52(4):422-30. 3. Silva A, Queiroz SS, Andersen ML, et al (2013). Passive body heating improves sleep patterns in female patients with fibromyalgia. Clinics (Sao Paulo) 68(2): 135-139. 4. Knibbe NE, Knibbe JJ (1996). Postural Load of nurses during bathing and showering of patients: Results of a laboratory Study. American Society of Safety Engineers. November. 37-39.

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • België • +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be

ARJO

Arjo.A00271.1.0.BE.NL