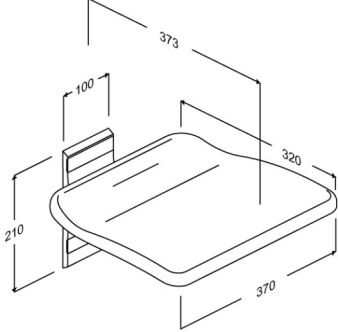




Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510000
Kleur	VVS:777531000 NRF:7501001 RSK:7973939 EAN:5708590306339 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Wit
Beschrijving	 <p>De zitting is geschikt voor situaties waarin extra zitplaatsen vereist zijn en de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld in keukens, liften en corridors op luchthavens. Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche.</p> <p>PLUS opklapbaar zitje. Voor vaste montage. Materialen: aluminium, duroplast kunststof, kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 435 kg. Wanneer de zitting is belast met 435 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 199 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy Functie	De opklapbare zitting is gemaakt van duroplast kunststof en de montage-en ophangbeugel zijn gemaakt van 10 mmgeanodiseerd aluminium. De uiteinden zijn gemaakt van ABS-kunststof. Ergonomisch gevormde zitting, die een goede en comfortabele ondersteuning biedt. De zitting kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is, of om ruimte vrij te maken.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



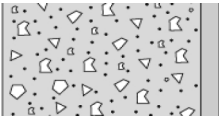
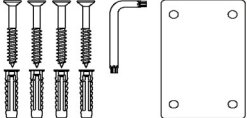

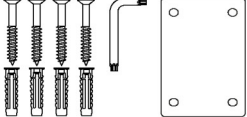
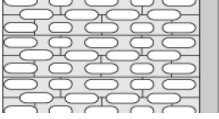
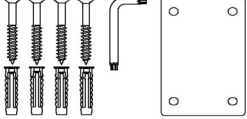
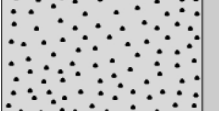
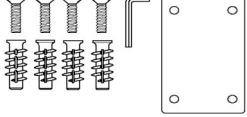
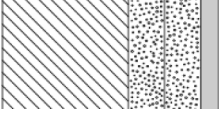
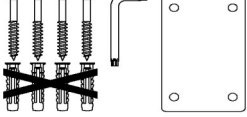
PRESSALIT®

Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510000
Reiniging	<p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.</p> <p>"</p>
Conformiteitsverklaring	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.</p>

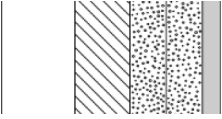
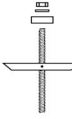


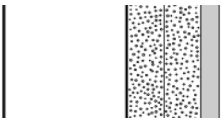
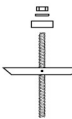


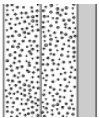


Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen >=H12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 