


Het mobiele beugelsysteem waarbij permanent de vacuümstand en daarmee de hechtkracht wordt gecontroleerd.

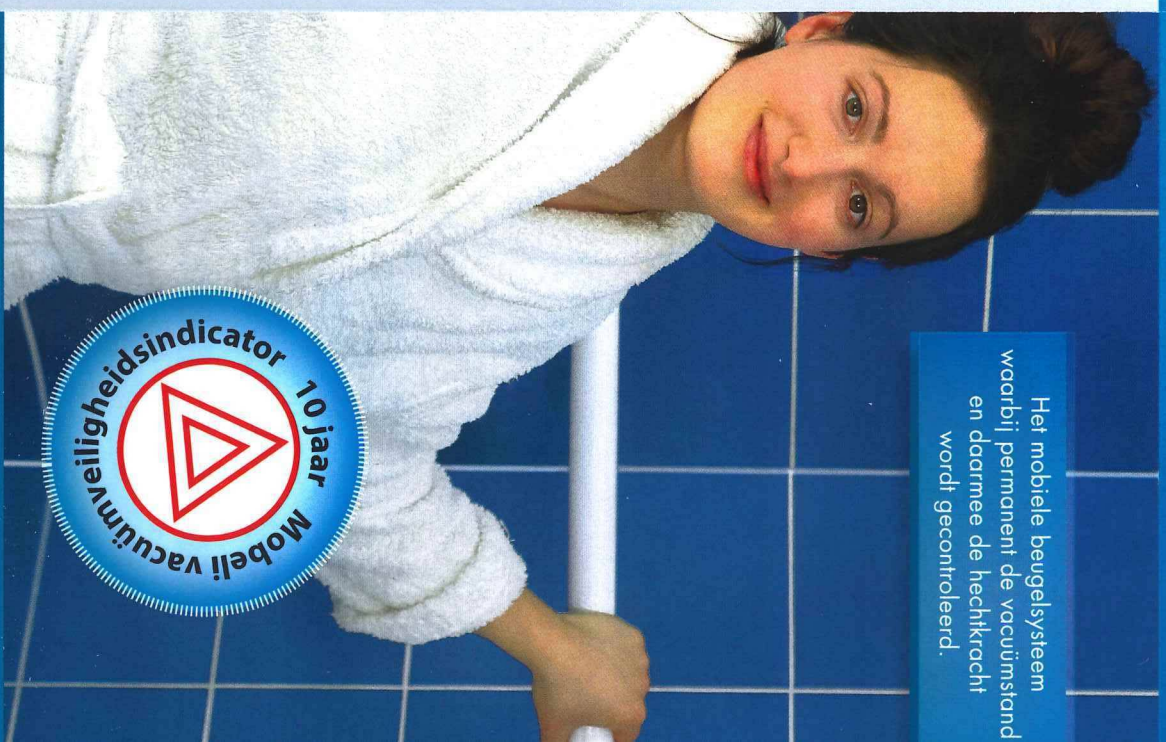

MOBELLI®

Mobilele wandbeugels - geniaal eenvoudig en veilig.

Ondersteuningssystemen


Veilige ondersteuning. Precies waar u het nodig heeft.


Een zeer populaire combinatie bij een muur is de QuattroPower support samen met een klassieke Mobeli wandbeugel (vast model of verstelbaar).

Afhankelijk van de wensen en de ruimte, kan dit ondersteuningssysteem bijvoorbeeld aan beide zijden van een WC opwaarts of neerwaarts bevestigd worden. Het bijvoorbeeld voordeel bij een opwaarts bevestiging is dat de gebruiker een extra punt heeft bij het steunen en omhoog komen. Ons QuattroPower ondersteuningssysteem biedt talloze bevestigingsmogelijkheden en kan ook ingezet worden bij fysiotherapie.

Ruimtebesparende oplossing: Het QuattroPower systeem kan omgezet worden naar een beugel met 4 zuignappen. De beugel is verkrijgbaar in een stangdiameter van 26 mm voor kinderen en een standaard diameter van 35 mm.




		Artikelnr.
QuattroPower steun	80 kg	14002 65 S
QuattroPower steun met handgreep	80 kg	14002 66 S
QuattroPower steun kind	60 kg	14002 68 S
QuattroPower steun kind met handgreep	60 kg	14002 69 S

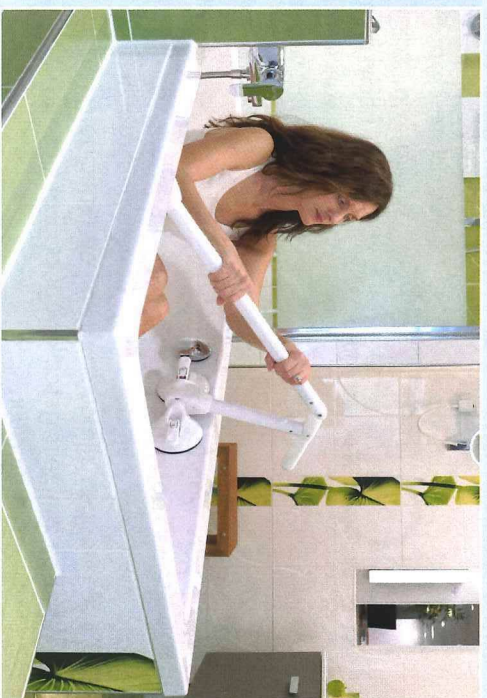

QuattroPower badbeugel. Geoptimaliseerd voor het bad: Met de Mobeli QuattroPower badbeugel stapte u veilig in en uit bad. Hoge belastbaarheid. Houd voordat u in of uit bad stapte de beugel vast met twee handen en laat pas los op het moment dat u veilig zit of stevig staat.

De QuattroPower badbeugel kan overigens aan de buiten- of binnenkant van de bandwand worden bevestigd. Blijft zelfs onder water goed vastzitten.



		Artikelnr.
QuattroPower badbeugel* kort	80 kg	14002 63 S
QuattroPower badbeugel* kort met handgreep	80 kg	14002 64 S
QuattroPower badbeugel	80 kg	14002 61 S
QuattroPower badbeugel met handgreep	80 kg	14002 62 S

* voor smalle baden

Veiligheid boven alles.

Altijd de juiste oplossing.



MOBELLI®

Het innovatieve origineel.



Kiephandelstop.
Veiligheidsstol.

MOBELLI producten zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers. Meer informatie kunt u vinden in onze gebruiksaanwijzing en op onze website: www.mobeli.de/download-berreich

ROTH®

Roth GmbH
Kohlbergstr. 5
D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23






12/2021
Wijzigingen voorbehouden.

Accessoires

Handige onderdelen voor het Mobeli systeem.

- (1) **Aanschuifbare contrastringen:** Een handig hulpmiddel bij visuele beperkingen. Kleur: rood.
- (2) **Gebruik de drukknopjes** om de beugel uit elkaar te halen, als bescherming en om er de contrastringen op aan te brengen.
- (3) **Kiephandelstop met veiligheidsstol.** Met dit veiligheidsstol kan de Mobeli wandbeugel op slot gezet worden. Vergelijkbaar met een hangslot.
- (4) Indien uw tegels kleiner zijn dan 14 x 14 cm, zijn er **zelflevende roestvrijstalen platen** waarop de Mobeli beugel kan worden bevestigd. Let op dat u ze op een vlakke ondergrond plaatst.

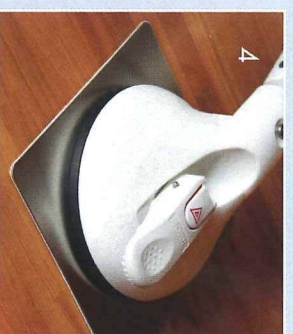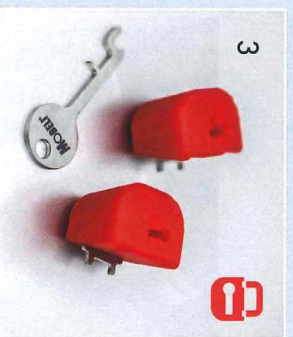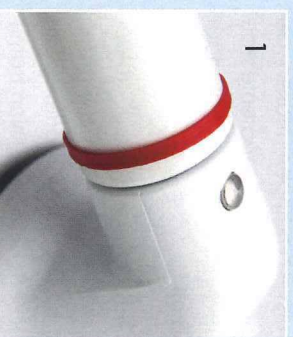


	Artikelnr.
Kiephandelstop (veiligheidsstol)	1402766
Drukknopjes	1402767
Aanschuifbare contrastringen	1400672
Roestvrijstalen platen (zelflevend) paar (145 x 145 mm)	1461414



QuattroPower steun. Stevige ondersteuning zonder boren. Positioneer het QuattroPower systeem, haal de kiephandel over en klaar.

QuattroPower ondersteuningssystemen zijn ontwikkeld voor een maximum gebruikersgewicht van 80 kg. De QuattroPower beugel kan horizontaal of verticaal geplaatst worden. Het QuattroPower ondersteuningssysteem met 4 zuignappen vermindert trek- en schuifkrachten. Voordeel: Kan zelfs op betegelde spouwmuren worden bevestigd (bijv.: 2-laags gipskartonplaten). Dure oplossingen voor muurversteving bij geschroefde beugels zijn niet nodig.

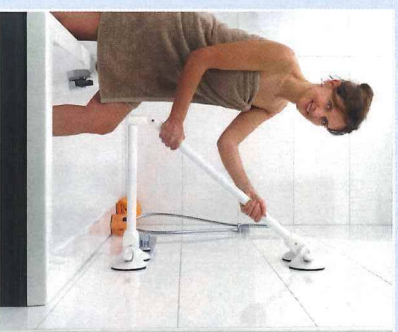

www.mobeli.de

U kunt contact met ons opnemen via info@mobeli.de

Heeft u onze video al bekeken? Deze kunt u vinden onder

Mobiele wandbeugels

Blijf mobiel. Over win beperkingen.

Het gepatenteerde Mobeli systeem van ROTH is al tien jaar een praktisch ondersteuningssysteem voor gehandicapten en ouderen. De mobiele wandbeugels zijn snel en eenvoudig te bevestigen en even makkelijk los te maken. De beide zuignappen hebben een diameter van 12 mm en zijn eenvoudig op een gladde porïendichte oppervlakte te bevestigen. Aandrukken, de kiephendel overhalen en klaar.

Alle wandbeugels zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal en volgens de Duitse TÜV Süd richtlijnen getest. Ze hebben een zeer grote hechtkracht en zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar.

De elegante CHROMELOOK Premium wandbeugels hebben een uniek anti-slip ,dubbel-parel' structuur en passen hierdoor perfect bij andere chromen badkamerarmaturen.

Beugellengte mm		Artikelnr.
Wandbeugel 110	105 kg	14002 20 S
Wandbeugel 210	100 kg	14002 25 S
Wandbeugel 350	95 kg	14002 26 S
Wandbeugel 650	95 kg	14002 27 S
Verstelbare wandbeugel 220-345	85 kg	14002 21 S
Verstelbare wandbeugel 340-465	85 kg	14002 22 S
Verstelbare wandbeugel 440-565	85 kg	14002 23 S
Verstelbare wandbeugel 665-790	80 kg	14002 24 S
CHROMELOOK Premium versie:		
Wandbeugel 350	95 kg	14002 26 SCL
Wandbeugel 650	95 kg	14002 27 SCL



De mobiele wandbeugels zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de natuurlijke beweging. Ze zijn niet bedoeld om het volledige lichaamsgewicht te dragen. Alle MOBELI wandbeugels zijn door TÜV Süd getest volgens de huidige ISO 17966: 2016 standaard voor medische hulpmiddelen. In deze nieuwe testmethode wordt de belastbaarheid nu met maximaal gebruiksgewicht aangegeven. In deze standaard is het een vereiste dat mobiele wandbeugels uitgerust zijn met een veiligheidsindicator en bovendien nog een zichtbaar restvermogen overhouden. De Mobeli veiligheidsindicator voldoet aan deze hoogste technische eisen voor medische hulpmiddelen.

Veiligheidsindicator

Mobiel en veilig. Veiligheid boven alles.

Mobeli is de originele mobiele wandbeugel en werkt voortdurend aan uitbreiding van het productassortiment. Alle wandbeugels uit het Mobeli systeem worden ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland door ROTH, een bedrijf met een rijke traditie.

Mobeli veiligheidsindicator: De vacuümstand wordt permanent gecontroleerd.



Indien de veiligheidsindicator volledig in de kiephendel is verzinken, is de hechtkracht correct en de beugel volledig belastbaar (gebruikersgewicht is op iedere wandbeugel aangegeven).



Als er een rode streep te zien is aan de zijkant van de veiligheidsindicator moet de beugel onmiddellijk opnieuw worden bevestigd. Het principe: Bij vacuümverlies steekt de veiligheidsindicator uit. Er is nog een verminderde hechtkracht aanwezig, maar de wandbeugel kan niet langer het aangegeven gebruikersgewicht dragen. Dus de beugel ontkoppelen en opnieuw bevestigen.

Ideaal voor op reis. Onze mobiele wandbeugels zijn eenvoudig uit elkaar te halen. Zij nemen weinig ruimte in beslag in uw bagage en zijn weer net zo makkelijk in elkaar te zetten op uw reisbestemming - zonder gereedschap.



MOBELI®

Zuignap

De interne koppeling van de zuignap en zuignapkop zorgt voor een aanzienlijk hogere hechtkracht. De zuignappen zijn gemaakt van een speciaal rubber en zijn zelfs geschikt voor badkamertegels met een lichte structuur.

Verstelbare wandbeugel


De interne koppeling van de zuignap en zuignapkop zorgt voor een aanzienlijk hogere hechtkracht. De zuignappen zijn gemaakt van een speciaal rubber en zijn zelfs geschikt voor badkamertegels met een lichte structuur.



3

QuattroPlus

Meer mobiliteit. Thuis en onderweg.

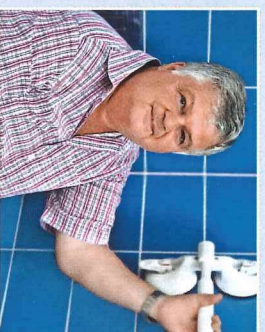

Variant met een hogere belasting: de mobiele QuattroPlus vacuüm beugel kan aan de muur en in een hoek worden bevestigd. De geïntegreerde kruisverbindingen maken de QuattroPlus zeer flexibel. De in Europa en VS gepatenteerde QuattroPlus kan wegens zijn hoge belastbaarheid ook door zwaardere personen worden gebruikt.

Dank zij de geïntegreerde kruisverbindingen (360° roteerbaar) kan de QuattroPlus zelfs aan een deurframe worden bevestigd. Voorwaarde hierbij is een stevige, porïendichte en vlakke ondergrond, zoals bijvoorbeeld een metalen frame. Het maximale gebruikersgewicht van 160 kg wordt hierdoor niet beïnvloed.



Beugellengte mm		Artikelnr.
QuattroPlus 200-325	160 kg	14002 41 S
QuattroPlus 320-445	160 kg	14002 42 S
QuattroPlus 420-545	160 kg	14002 43 S
QuattroPlus 645-770	150 kg	14002 44 S

6



Drukknopjes

Alle Mobeli wandbeugels zijn snel en eenvoudig zonder gereedschap te bevestigen en zijn even makkelijk weer los te maken om mee op reis te nemen. Zoals alle metalen onderdelen van het Mobeli systeem zijn de drukknopjes gemaakt van roestvrijstaal.

Vacuümveiligheidsindicator

Een revolutionaire ontwikkeling. De enige mobiele wandbeugel waarbij permanent de vacuümstand en daarmee de hechtkracht wordt gemeten en gecontroleerd. De Mobeli veiligheidsindicator controleert permanent de vacuümstand. Indien de veiligheidsindicator volledig in de kiephendel is verzinken, is de hechtkracht correct en de beugel volledig belastbaar. Als de veiligheidsindicator uitsteekt en er een rode streep zichtbaar is, dient de Mobeli wandbeugel opnieuw te worden bevestigd. De veiligheidsindicator is ook geschikt voor slechtzienden, want bij vacuümverlies is de veiligheidsindicator goed voelbaar. De Mobeli wandbeugels voldoen aan de hoogste technische eisen voor medische hulpmiddelen.

De mobiele MOBELI handgrepen voldoen aan
 CE Verordening (EU) 2017/745.

4


Handrail

Flexibel - met verstelbare hoek

De handrail met verstelbare hoek is het ideale hulpmiddel voor in de badkamer. Deze mobiele wandbeugel is een unieke combinatie van een horizontale en verticale beugel in één en kan in veel posities worden geplaatst en bijvoorbeeld gebruikt worden als hulpmiddel om uit het bad op te staan of als steun in de douchecabine. Grote actieradius en veelzijdig inzetbaar.

Richlijn DIN 18040 (in 5.3.5.), Barrièrevrij bouwen schrijft een hoogte voor van 85 cm voor horizontale en verticale beugels. De handrail met verstelbare hoek voldoet aan deze eisen in één oplossing, zowel rechts als links.

De handrail kan eenvoudig omgezet worden naar een losse wandbeugel voor onderweg.

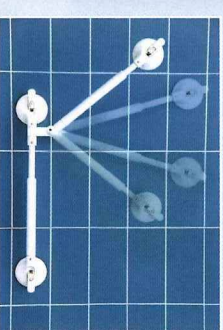

Beugellengte mm		Artikelnr.
Handrail met verstelbare hoek 340-465	85 kg	1400222H2S
Handrail met verstelbare hoek 440-565	85 kg	1400223H3S
Handrail met verstelbare hoek 350	95 kg	1400226H6S
Handrail met verstelbare hoek 650	95 kg	1400227H7S

7